

La Rivista Italiana della Medicina di Laboratorio Italian Journal of Laboratory Medicine

LINEE GUIDA PER L'IMPIEGO DI TEST PER AUTOANTICORPI ANTI ANTIGENI INTRACELLULARI NELLA DIAGNOSI E NEL MONITORAGGIO DELLE MALATTIE AUTOIMMUNI SISTEMICHE. REVISIONE 2015.

--Manuscript Draft--

Manuscript Number:	RIME-D-15-00022R1
Full Title:	LINEE GUIDA PER L'IMPIEGO DI TEST PER AUTOANTICORPI ANTI ANTIGENI INTRACELLULARI NELLA DIAGNOSI E NEL MONITORAGGIO DELLE MALATTIE AUTOIMMUNI SISTEMICHE. REVISIONE 2015.
Article Type:	Review (Rassegna)
Section/Category:	Clinical Section
Keywords:	Guidelines, Autoimmune rheumatic diseases, GRADE, recommendation, autoantibodies
Corresponding Author:	Luigi Cinquanta, M.D. ITALY
Corresponding Author Secondary Information:	
Corresponding Author's Institution:	
Corresponding Author's Secondary Institution:	
First Author:	Luigi Cinquanta, M.D.
First Author Secondary Information:	
Order of Authors:	Luigi Cinquanta, M.D. Nicola Bizzaro Danilo Villalta Gabriella Morozzi Elio Tonutti Marcello Bagnasco Gianpaola Pesce Danila Bassetti Brunetta Porcelli Lucia Terzuoli Antonio Antico Antonella Radice Gaia Deleonardi Marilina Tampoia Renato Tozzoli
Order of Authors Secondary Information:	
Funding Information:	
Abstract:	Riassunto Il Gruppo di Studio in Autoimmunologia (GdS-AI) della Società Italiana di Patologia

Clinica e Medicina di Laboratorio (SIPMeL), dopo 14 anni dalla ultima edizione, ha ritenuto opportuno revisionare e integrare le "linee guida per l'impiego di test per autoanticorpi nucleo-citoplasmatici nella diagnosi e nel monitoraggio delle malattie autoimmuni sistemiche", con l'aggiunta di nuove tematiche, la modifica di precedenti raccomandazioni e la rivalutazione di aspetti controversi del precedente documento. Per l'elaborazione di questa edizione, la valutazione della "qualità delle evidenze" e l'espressione della "forza delle raccomandazioni" sono state definite secondo il metodo GRADE (Grading of Recommendation Assessment, Development and Evaluation), frutto dell'attività avviata nel 2000 da un gruppo di lavoro internazionale che aveva come scopo la definizione di un metodo rigoroso ed esplicito per la produzione di raccomandazioni cliniche. Il documento è articolato in 18 raccomandazioni, suddivise in 4 sezioni; ognuna di esse è introdotta da un quesito clinico con scelta e valutazione formale degli outcome ad esso correlati, seguito dalla valutazione sistematica della letteratura scientifica e della qualità delle prove reperite. La definizione formale della forza delle raccomandazioni, espressa come "forte" o "debole", è stata assegnata per consenso da tutti i membri del GdS-AI della SIPMeL. Questa revisione delle linee guida, nel fornire una sintesi sullo stato attuale dei test per la ricerca degli autoanticorpi anti-antigeni intracellulari, formula una serie di raccomandazioni rivolte soprattutto all'appropriatezza della richiesta, alla metodologia analitica da utilizzare, all'interpretazione e alla modalità di refertazione dei risultati. Infine, il documento affronta problematiche ancora aperte, quali l'utilizzo di nuovi termini e acronimi per denominare i test autoanticorpali in uso nella diagnostica delle malattie reumatiche autoimmuni e la standardizzazione dei metodi di dosaggio degli autoanticorpi.

Summary

After 14 years since the last edition, the Study Group on Autoimmune Diseases (GdS-AI) of the Italian Society of Clinical Pathology and Laboratory Medicine (SIPMeL) has revised and supplemented the "Guidelines for the laboratory use of autoantibody tests in the diagnosis and monitoring of autoimmune rheumatic diseases", with addition of new themes, update of recommendations and reevaluation of the controversial aspects of the previous document.

For the preparation of this edition, the assessment of the "quality of evidence" and of "strength of the recommendations" has been defined by the GRADE (Grading of Recommendation Assessment, Development and Evaluation) method, developed in 2000 by an international working group as a rigorous and explicit method for the production of clinical recommendations. The document is divided into 4 sections including 18 recommendations; each is introduced by a question, followed by the systematic evaluation of the scientific literature and the quality of the evidence found. The formal definition of the strength of the recommendations, expressed as "strong" or "weak", has been assigned by consensus of all members of GdS-AI SIPMeL. This updated revision of the guidelines provides an overview on the current status of the tests for the detection of autoantibodies to intracellular antigens, including solid phase immunoassays and the automated reading of indirect immunofluorescence.

Recommendations are directed mainly to the appropriateness of the request, the analytical methodology to be used, the interpretation and reporting of results. Finally, the document approaches open issues, such as the use of new terms and acronyms to name autoantibody tests used to diagnose autoimmune rheumatic diseases and the harmonization of procedures for the detection of autoantibodies.

1
2 **Linee guida per l'utilizzo dei test autoanticorpali nella diagnosi e nel**
3 **monitoraggio delle malattie autoimmuni reumatiche sistemiche.**
4
5 **Revisione 2015**
6
7

8
9
10
11 *Guidelines for the laboratory use of autoantibody tests in the diagnosis*
12 *and monitoring of autoimmune rheumatic diseases. Revision 2015*
13
14
15

16 Luigi Cinquanta • Nicola Bizzaro • Danilo Villalta • Gabriella Morozzi • Elio Tonutti • Marcello
17 Bagnasco • Giampaola Pesce • Danila Bassetti • Brunetta Porcelli • Lucia Terzuoli • Antonio Antico
18 • Antonella Radice • Gaia Deleonardi • Marilina Tampoia • Renato Tozzoli • per il Gruppo di
19 Studio in Autoimmunologia della Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio
20
21

22 L. Cinquanta

23 Laboratorio di Patologia Clinica, Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona,
24 Salerno, Italia

25 N. Bizzaro

26 Laboratorio di Patologia Clinica, Ospedale San Antonio, Tolmezzo (UD), Italia

27 D. Villalta

28 Allergologia e Immunologia Clinica, Presidio Ospedaliero S. Maria degli Angeli, Pordenone, Italia

29 G. Morozzi

30 Dipartimento di Scienze Mediche ,Chirurgiche e Neuroscienze, Azienda Ospedaliera Universitaria
31 Senese, Siena, Italia

32 E. Tonutti

33 Immunopatologia e Allergologia, Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia, Udine, Italia

34 M. Bagnasco, G. Pesce

35 DIMI, Università degli Studi di Genova, Genova, Italia

36 D. Bassetti

37 Microbiologia e Virologia, Ospedale S. Chiara, Trento, Italia

38 B. Porcelli, L. Terzuoli

39 Dipartimento Biotecnologie Mediche, Università degli Studi di Siena, Siena, Italia

40 A. Antico

41 Laboratorio Analisi, Ospedale Civile, Santorso (VI), Italia

42 A. Radice

43 UO Microbiologia e Virologia, Ospedale San Carlo Borromeo, Milano, Italia

44 G. Deleonardi

45 Laboratorio Analisi, Ospedale Maggiore, Bologna, Italia

46 M. Tampoia

47 Patologia Clinica Universitaria, Policlinico Consorziale, Bari, Italia

48 R. Tozzoli

49 Laboratorio di Patologia Clinica, Presidio Ospedaliero S. Maria degli Angeli, Pordenone, Italia
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

L. Cinquanta 

Laboratorio di Patologia Clinica, Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona,
Via S. Leonardo, 84100 Salerno

Tel. +39 089 672657

Fax +39 089 672594

E-mail luigi.cinquanta@alice.it

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1 **Riassunto** Il Gruppo di Studio in Autoimmunologia (GdS-AI) della Società Italiana di Patologia
2 Clinica e Medicina di Laboratorio (SIPMeL), dopo 14 anni dalla ultima edizione, ha ritenuto
3 opportuno revisionare e integrare le “linee guida per l’impiego di test per autoanticorpi nucleo-
4 citoplasmatici nella diagnosi e nel monitoraggio delle malattie autoimmuni sistemiche”, con
5 l’aggiunta di nuove tematiche, la modifica di precedenti raccomandazioni e la rivalutazione di
6 aspetti controversi del precedente documento.
7

8
9 Per l’elaborazione di questa edizione, la valutazione della “qualità delle evidenze” e l’espressione
10 della “forza delle raccomandazioni” sono state definite secondo il metodo GRADE (*Grading of*
11 *Recommendation Assessment, Development and Evaluation*), frutto dell’attività avviata nel 2000 da
12 un gruppo di lavoro internazionale che aveva come scopo la definizione di un metodo rigoroso ed
13 esplicito per la produzione di raccomandazioni cliniche. Il documento è articolato in 18
14 raccomandazioni, suddivise in 4 sezioni; ognuna di esse è introdotta da un quesito clinico con scelta
15 e valutazione formale degli *outcome* a esso correlati, seguito dalla valutazione sistematica della
16 letteratura scientifica e della qualità delle prove reperite. La definizione formale della forza delle
17 raccomandazioni, espressa come “forte” o “debole”, è stata assegnata per consenso da tutti i membri
18 del GdS-AI della SIPMeL. Questa revisione delle linee guida, nel fornire una sintesi sullo stato
19 attuale dei test per la ricerca degli autoanticorpi anti-antigeni intracellulari, formula una serie di
20 raccomandazioni rivolte soprattutto all’appropriatezza della richiesta, alla metodologia analitica da
21 utilizzare, all’interpretazione e alla modalità di refertazione dei risultati. Infine, il documento
22 affronta problematiche ancora aperte, quali l’utilizzo di nuovi termini e acronimi per denominare i
23 test autoanticorpali in uso nella diagnostica delle malattie reumatiche autoimmuni e la
24 standardizzazione dei metodi di dosaggio degli autoanticorpi.
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34 **Parole chiave** Linne guida • Malattie reumatiche autoimmuni • GRADE • Raccomandazione •
35 Autoanticorpi
36
37
38
39

40 **Summary** After 14 years since the last edition, the Study Group on Autoimmune Diseases (GdS-
41 AI) of the Italian Society of Clinical Pathology and Laboratory Medicine (SIPMeL) has revised and
42 supplemented the “Guidelines for the laboratory use of autoantibody tests in the diagnosis and
43 monitoring of autoimmune rheumatic diseases”, with addition of new themes, update of
44 recommendations and reevaluation of the controversial aspects of the previous document.
45 For the preparation of this edition, the assessment of the “quality of evidence” and of “strength of
46 the recommendations” has been defined by the GRADE (Grading of Recommendation Assessment,
47 Development and Evaluation) method, developed in 2000 by an international working group as a
48 rigorous and explicit method for the production of clinical recommendations. The document is
49 divided into 4 sections including 18 recommendations; each is introduced by a question, followed
50 by the systematic evaluation of the scientific literature and the quality of the evidence found. The
51 formal definition of the strength of the recommendations, expressed as “strong” or “weak”, has
52 been assigned by consensus of all members of GdS-AI SIPMeL. This updated revision of the
53 guidelines provides an overview on the current status of the tests for the detection of autoantibodies
54 to intracellular antigens, including solid phase immunoassays and the automated reading of indirect
55 immunofluorescence. Recommendations are directed mainly to the appropriateness of the request,
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1 the analytical methodology to be used, the interpretation and reporting of results. Finally, the
2 document approaches open issues, such as the use of new terms and acronyms to name
3 autoantibody tests used to diagnose autoimmune rheumatic diseases and the harmonization of
4 procedures for the detection of autoantibodies.
5

6 **Key words** Guidelines • Autoimmune rheumatic diseases • GRADE • Recommendation •
7 Autoantibodies
8

9

10

11

12 **Introduzione**

13
14 Le linee guida sono “raccomandazioni di comportamento, elaborate mediante un processo di
15 revisione sistematica della letteratura e delle opinioni di esperti, con lo scopo di aiutare i medici
16 nella scelta delle modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche” [1]. Le
17 linee guida nascono quindi per rispondere a un obiettivo fondamentale: assicurare il massimo grado
18 di appropriatezza degli interventi, riducendo al minimo quella parte di variabilità nelle decisioni
19 cliniche che è legata alla carenza di conoscenze e alla soggettività nella definizione delle strategie
20 diagnostico-assistenziali. L’elaborazione e il periodico aggiornamento delle linee guida
21 costituiscono perciò un processo dinamico, mai concluso, teso a modificare positivamente decisioni
22 e comportamenti nei percorsi diagnostico-terapeutici. Negli anni trascorsi dalla pubblicazione delle
23 “Linee guida per la diagnosi e il monitoraggio delle malattie autoimmuni sistemiche” nel 1999 [2] e
24 dalle successive revisioni da parte del Gruppo di Studio in Autoimmunologia (GdS-AI) della
25 Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio (SIPMeL) [3, 4], le metodologie di
26 ricerca degli anticorpi anti-antigeni nucleo-citoplasmatici sono ulteriormente progredite e nuovi
27 autorevoli documenti sono stati pubblicati sull’argomento, come le ultime raccomandazioni
28 prodotte dall’EASI (*European Autoimmunity Standardization Initiative*) [5]. Molti studi hanno
29 confermato nel tempo gran parte delle raccomandazioni presenti nella prima versione delle linee
30 guida del GdS-AI. Altri studi, invece, hanno modificato alcuni dei precedenti percorsi suggerendo
31 nuove raccomandazioni basate sulle conoscenze più recenti. L’obiettivo di questo documento è
32 integrare le precedenti linee guida del GdS-AI in base ai risultati degli studi pubblicati negli ultimi
33 14 anni sugli autoanticorpi anti-antigeni intracellulari, per un loro migliore utilizzo nella diagnosi e
34 nel monitoraggio delle malattie reumatiche autoimmuni (MRA). Nonostante lo sforzo profuso nella
35 rielaborazione, il gruppo è consapevole che il documento non copre ogni necessità e non soddisferà
36 tutti i professionisti che si occupano di autoimmunologia nel laboratorio clinico. Lo sforzo fatto,
37 con lo stesso spirito con cui erano state riviste nel 2002 le linee guida del 1999, rappresenta un
38 ulteriore passo per affrontare meglio il lavoro di ogni giorno.
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51

52 **Approccio utilizzato per l’elaborazione delle linee guida**

53
54 Negli ultimi decenni, con il crescere della popolarità e dell’uso dello strumento “linee guida”, un
55 numero sempre maggiore di organizzazioni ha sviluppato e utilizzato differenti metodi di
56 valutazione della qualità delle evidenze e della forza delle raccomandazioni. A oggi sono disponibili
57 diversi sistemi di classificazione, molti dei quali però non distinguono adeguatamente il concetto di
58 “qualità delle prove” e di “forza delle raccomandazioni”. A questo proposito la nuova
59 concettualizzazione proposta dal metodo GRADE (*Grading of Recommendation Assessment*,
60
61
62
63
64
65

1 *Development and Evaluation*) [6] per la valutazione della qualità delle prove, necessaria nel
2 percorso di formulazione di raccomandazioni di comportamento su temi di rilevanza clinico-
3 epidemiologica, appare come il miglior sistema per strutturazione e trasparenza. Il Gruppo di Studio
4 in Autoimmunologia della SIPMeL ha identificato 18 domande, suddivise in 4 sezioni, relative
5 all'impiego di test per la ricerca di autoanticorpi anti-antigeni intracellulari nella diagnosi e nel
6 monitoraggio delle MRA. La letteratura relativa a ogni domanda è stata riesaminata tenendo in
7 debito conto che, se per molti quesiti terapeutici gli studi controllati randomizzati (RCT) sono la
8 migliore opzione metodologica, per quesiti di tipo non terapeutico (per es. nella valutazione
9 dell'accuratezza di un test diagnostico) il disegno RCT non solo non è utile, ma la sua applicazione
10 è, di fatto, inappropriata [6]. Nella ricerca di citazioni rilevanti per la revisione è stato interrogato il
11 database PubMed utilizzando i seguenti termini Mesh: *antinuclear antibody, extractable nuclear*
12 *antigens, anti-DNA antibodies, connective tissue diseases, autoimmune diseases, autoimmune*
13 *rheumatic diseases*. La ricerca bibliografica è stata integrata con l'esame della bibliografia presente
14 negli articoli più significativi e con l'opinione e l'esperienza di clinici e specialisti di laboratorio.
15 Nel documento finale ogni argomento è introdotto da una domanda, seguita quando possibile da una
16 raccomandazione formale. Il metodo GRADE prevede che le raccomandazioni siano assegnate a
17 due categorie mutualmente esclusive: "forte" e "debole" a favore o contro uno specifico intervento.
18 Il metodo GRADE suggerisce, in merito alla valutazione della qualità delle evidenze, di procedere
19 valutando prima la qualità per singolo *outcome* e successivamente di formulare un giudizio
20 complessivo, considerando soltanto gli *outcome* critici o essenziali per la formulazione della
21 raccomandazione relativa al quesito clinico. La qualità delle prove su cui si basa la
22 raccomandazione è stata a sua volta classificata come "forte", "moderata", "bassa" o "molto bassa".
23 Secondo il metodo GRADE la valutazione della qualità delle prove non deve basarsi solo
24 sull'appropriatezza del disegno dei singoli studi disponibili (*trial* clinico controllato, studio
25 osservazionale, altro), ma deve anche considerare altri criteri, che sono in parte studio-specifici e in
26 parte richiedono invece una valutazione d'insieme all'interno della revisione sistematica, relativi a:

- 27 • limiti nella qualità di conduzione dei singoli studi;
- 28 • coerenza dei risultati tra studi differenti;
- 29 • diretta applicabilità/rilevanza dei risultati rispetto ai soggetti/pazienti per i quali deve essere
30 formulata la raccomandazione;
- 31 • precisione dei risultati;
- 32 • pubblicazione selettiva dei dati;
- 33 • forza dell'associazione tra intervento e *outcome*;
- 34 • presenza di un gradiente dose-risposta;
- 35 • "direzione" degli effetti dei confondenti plausibili.

36 L'interpretazione di questo sistema di valutazione è spiegata in dettaglio nella **Tabella 1**.

37 Con questo sistema di classificazione, una raccomandazione può essere forte anche sulla base di
38 prove di bassa qualità se si arriva, comunque, alla conclusione che i benefici superano i rischi e gli
39 effetti indesiderati (o, viceversa, per raccomandazioni negative). La forza delle raccomandazioni è
40 stata assegnata per consenso da tutti i membri del Gruppo di Studio in Autoimmunologia della
41 SIPMeL.

Sezione 1. Significato dei termini “autoanticorpi anti-nucleo” (ANA) e “antigeni nucleari estraibili” (ENA)

Ia. *Il termine “autoanticorpi anti-nucleo” e l’acronimo “ANA”, riferendosi a un insieme di autoanticorpi diretti verso vari distretti cellulari anche diversi dal nucleo, devono essere considerati anacronistici?*

Gli autoanticorpi anti-nucleo (ANA) sono diretti verso distinti componenti del nucleo e tradizionalmente sono ricercati con la tecnica di immunofluorescenza indiretta (IFI). Con questa metodica, oltre agli anticorpi diretti verso componenti nucleari, si evidenziano anche anticorpi diretti verso antigeni situati in altri compartimenti cellulari. Quando vengono utilizzate le cellule HEp-2 come substrato, il metodo IFI consente la rilevazione di autoanticorpi diretti verso almeno 30 distinti antigeni nucleari e citoplasmatici [7]. Inoltre non tutti gli autoantigeni sono strettamente localizzati in un unico compartimento cellulare e la loro funzione e relativa concentrazione nei diversi distretti varia in relazione allo stato fisiologico della cellula [8]. Il termine anticorpi anti-nucleo, nella sua accezione letterale, è pertanto riduttivo, poiché il metodo utilizzato rileva la presenza di un insieme di autoanticorpi diretti verso diverse strutture cellulari che comprendono costituenti nucleari, componenti della membrana nucleare, dell’apparato mitotico, del citosol, degli organelli citoplasmatici e della membrana cellulare [9]. Una nuova terminologia (per es. anticorpi anti-antigeni intracellulari) potrebbe descrivere con maggiore precisione il reale ambito diagnostico del test. Tuttavia, l’uso dell’acronimo ANA è talmente radicato e universalmente impiegato da più di 50 anni che, al momento, non appare facilmente sostituibile. La sua sostituzione in maniera unilaterale da parte del GdS-AI potrebbe dunque costituire un inutile sforzo di scarso impatto. Il GdS-AI ritiene che l’acronimo ANA possa essere al momento mantenuto, ma che a esso venga associata la dicitura “anticorpi anti-antigeni intracellulari” in modo da esplicitare chiaramente che la ricerca comprende gli autoanticorpi diretti verso tutti i costituenti cellulari e non solo quelli contenuti nel nucleo.

Raccomandazione: *Il termine “autoanticorpi anti-nucleo” e il corrispettivo acronimo ANA non possono essere considerati tecnicamente corretti poiché non sono esaustivi dello spettro di tutti gli autoanticorpi riconosciuti. Dovrebbero perciò essere sostituiti da nuovi termini e acronimi, capaci di comprendere tutti gli autoanticorpi diretti nei confronti di qualsiasi epitopo e costituente cellulare rilevabile con le attuali procedure analitiche, per rendere i referti più comprensibili ed evitare errori interpretativi. Tuttavia l’acronimo ANA, a causa del suo uso consolidato e universalmente adottato, può continuare a essere utilizzato con la dicitura “ANA – anticorpi anti-antigeni intracellulari”.*

Qualità globale delle evidenze: moderata

Forza della raccomandazione: forte

Ib. *L’acronimo ENA (extractable nuclear antigens) può essere considerato obsoleto in quanto inadeguato a indicare tutte le specificità anticorpali dirette nei confronti degli autoantigeni nucleo-citoplasmatici attualmente rilevabili?*

1 Originariamente il termine ENA era riferito alle proteine nucleari estraibili in soluzione salina o in
2 acetone, utilizzate per identificare gli antigeni bersaglio degli ANA [10]. Questo termine viene oggi
3 utilizzato in maniera molto più ampia per indicare tutte le specificità antigeniche, comprese quelle
4 nucleari non estraibili e quelle citoplasmatiche. Il termine ENA, coniato circa 35 anni orsono,
5 appare perciò ormai inadeguato a rappresentare la grande varietà di autoantigeni nucleo-
6 citoplasmatici estraibili e non estraibili identificati negli ultimi anni. Il termine *anticorpi anti-*
7 *antigeni nucleo-citoplasmatici specifici* o *anticorpi anti-antigeni intracellulari specifici* appare più
8 adatto a identificare l'insieme dei test diagnostici definiti attualmente anti-ENA.
9

10
11 **Raccomandazione.** *L'acronimo ENA (extractable nuclear antigens) dovrebbe essere sostituito dal*
12 *termine "anticorpi anti-antigeni nucleo-citoplasmatici specifici" o "anticorpi anti-antigeni*
13 *intracellulari specifici" poiché oggi possono essere ricercati autoanticorpi diretti verso un*
14 *numero maggiore di specificità antigeniche cellulari di quelle rilevabili quando fu coniato*
15 *l'acronimo, comprese quelle nucleari non estraibili e quelle citoplasmatiche.*
16
17

18
19 Qualità globale delle evidenze: moderata

20 Forza della raccomandazione: forte
21
22
23
24

25 **Sezione 2. Anticorpi anti-antigeni intracellulari (ANA)**

26
27 **2a.** *Nei pazienti con segni e sintomi riconducibili a MRA deve essere sempre eseguita la ricerca*
28 *degli anticorpi anti-antigeni intracellulari, il cosiddetto test ANA, come test di primo livello?*
29
30

31 La presenza degli ANA è associata con le MRA [11]; in particolare, è utile nello screening iniziale
32 dei pazienti con sospetto di lupus eritematoso sistemico (LES) [12, 13] e per l'inquadramento
33 diagnostico di altre patologie autoimmuni, tra le quali la sindrome di Sjögren, la malattia mista del
34 tessuto connettivo (MCTD), il lupus eritematoso indotto da farmaci, la dermatopolimiosite e la
35 sclerodermia (SSc). Il metodo di riferimento per la ricerca degli ANA è tuttora l'IFI, tecnica
36 analitica descritta da Coons e Kaplan nel 1950. Infatti, il test per la ricerca degli ANA in IFI su
37 cellule HEp-2 (che contengono più di 100 antigeni diversi) possiede le caratteristiche proprie di un
38 *array* e ha un'elevata sensibilità diagnostica, in particolare per alcune MRA, come il LES (95%), la
39 MCTD (100%) e il lupus indotto da farmaci (100%). La dimostrazione di anticorpi anti-antigeni
40 intracellulari costituisce criterio classificativo-diagnostico per alcune malattie autoimmuni
41 sistemiche, mentre per altre assume un ruolo di supporto alla diagnosi (valore diagnostico) [Tabella
42 2] [14]. Gli autoanticorpi anti-antigeni intracellulari possono precedere di anni le manifestazioni
43 cliniche della patologia autoimmune e hanno perciò valore predittivo [15-22]. Questa caratteristica
44 degli ANA offre una finestra di opportunità per intervenire, in termini di prevenzione e di
45 trattamento, al fine di modificare il decorso naturale della patologia (valore preventivo) [23]. Infine,
46 gli autoanticorpi anti-antigeni intracellulari, in alcune condizioni, forniscono indicazioni sulla
47 severità del decorso clinico e sulla probabilità d'insorgenza di complicanze, per esempio nel LES,
48 nelle miopatie infiammatorie e nella SSc (valore prognostico) [24-26]. È da rimarcare, tuttavia, che
49 un risultato positivo del test non è specifico per MRA [27, 28]. Gli ANA sono infatti presenti anche
50 in pazienti non affetti da patologie autoimmuni (malattie infettive, neoplastiche ecc.) e nei pazienti
51 che assumono determinati farmaci. Infine, ANA falsi positivi (presenza di autoanticorpi anti-
52 antigeni intracellulari in assenza di malattie autoimmuni) possono essere rinvenuti in individui sani,
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

più frequentemente di sesso femminile, soggetti anziani e parenti di primo grado di pazienti con malattie autoimmuni [29-31].

Raccomandazione. La ricerca degli ANA con metodo IFI, per la sua elevata sensibilità diagnostica, costituisce il test di primo livello per la diagnosi delle MRA. In considerazione della non elevata specificità, il test ANA deve essere richiesto come supporto alla diagnosi di malattia in pazienti con caratteristiche cliniche suggestive di una patologia reumatica autoimmune.

Qualità globale delle evidenze: alta

Forza della raccomandazione: forte

2b. Il test ANA può essere utilizzato allo scopo di escludere la presenza di malattie reumatiche autoimmuni?

Considerata la frequenza di positività degli ANA nelle MRA (100% nella MCTD, variabile tra 95% e 100% nel LES, 60% e 80% nella sclerosi sistemica, 30% e 80% nella dermato/polimiosite, 40% e 70% nella sindrome di Sjögren [11, 24]) è altamente improbabile che un paziente con un risultato negativo per gli ANA sia affetto da LES o MCTD, mentre non può essere escluso che possa essere affetto da un'altra MRA [26, 32, 33]. In rari casi il test può risultare negativo in pazienti con LES [34]. I pazienti con lupus che hanno un test ANA negativo possono in realtà presentare anticorpi anti-SSA/Ro [35, 36] che non sono sempre rilevabili a causa della ridotta espressione degli antigeni-bersaglio nelle cellule HEP-2 o per perdita o denaturazione degli antigeni durante la procedura di fissazione [37].

Raccomandazione. Un test ANA negativo ha un elevato valore predittivo negativo solo per il LES e la MCTD e non esclude comunque la possibilità che il paziente sia affetto da altra MRA.

Qualità globale delle evidenze: moderata

Forza della raccomandazione: forte

2c. La ripetizione nel tempo degli ANA precedentemente risultati negativi o positivi a basso titolo con metodologia IFI è giustificata in soggetti con scarsi o assenti segni e/o sintomi clinici?

Quando si ricercano gli ANA in una popolazione con bassa probabilità pretest di MRA è molto comune trovare risultati positivi a basso titolo [29]. Tuttavia, l'assunto che un risultato "positivo a basso titolo" sia clinicamente insignificante deve essere attentamente valutato perché la ridotta espressione di alcuni antigeni, la diversa affinità degli anticorpi verso gli antigeni bersaglio e la variabile e non sempre ottimale sensibilità analitica dei metodi IFI per le diverse specificità antigeniche possono concorrere a ridurre la sensibilità diagnostica del test [38]. La ricerca degli ANA può essere ripetuta dopo almeno 6-12 mesi in caso di condizioni cliniche stazionarie o prima in caso di comparsa di nuovi segni o sintomi sospetti [8].

Raccomandazione. La ripetizione della ricerca degli ANA risultati negativi o positivi a basso titolo è giustificata in fase diagnostica in caso di successiva comparsa di segni clinici sospetti. In

1 *assenza di variazioni del quadro clinico non è consigliabile la ripetizione degli ANA prima di 6-*
2 *12 mesi.*

3 Qualità globale delle evidenze: moderata

4 Forza della raccomandazione: forte

5
6
7
8
9 **2d.** *Le variazioni del titolo degli ANA sono utili nel monitoraggio del decorso e della terapia dei*
10 *pazienti affetti da MRA, in quanto espressione dell'attività della malattia?*

11
12 La variazione del titolo degli ANA in IFI non è correlata con l'attività della malattia. Non è pertanto
13 utile ripetere la ricerca degli ANA in assenza di un cambiamento del quadro clinico, tale da
14 implicare variazioni della diagnosi e/o dell'approccio terapeutico [8, 39]. La determinazione degli
15 ANA ha principalmente valore di inquadramento diagnostico e non è in generale utile ai fini del
16 monitoraggio dell'attività di malattia. In età pediatrica un'eccezione è rappresentata dall'artrite
17 giovanile cronica/artrite giovanile infiammatoria in cui un elevato titolo anticorpale o un suo
18 incremento può identificare un subset di pazienti a rischio di sviluppare uveite [40].

19
20
21
22 **Raccomandazione.** *Nei pazienti con diagnosi consolidata di MRA non è appropriata la*
23 *ripetizione degli ANA se non in presenza di mutamenti del quadro clinico.*

24 Qualità globale delle evidenze: moderata

25 Forza della raccomandazione: forte

26
27
28
29
30
31
32 **2e.** *È possibile eseguire la ricerca degli ANA con metodi analitici alternativi all'IFI (ELISA, MBA,*
33 *CLIA, FEIA, ALBIA ecc.)?*

34
35 Nonostante i recenti progressi nell'automazione della procedura analitica e nel riconoscimento dei
36 quadri fluoroscopici mediante sistemi esperti [41], la ricerca degli ANA con la tecnica IFI presenta
37 ancora alcune limitazioni metodologiche e interpretative: è una procedura che richiede tempo, è
38 scarsamente standardizzata ed è caratterizzata da interpretazione soggettiva e da scarsa
39 riproducibilità dei risultati. Inoltre, la tecnica IFI può talora produrre risultati falsamente negativi in
40 presenza di autoanticorpi anti-Jo1, anti-proteina P ribosomiale, anti-PCNA e anti-SSA/Ro [33, 42-
41 48]. L'evoluzione delle conoscenze, che ha ampliato il numero e il tipo dei test diagnostici necessari
42 per inquadrare accuratamente le malattie autoimmuni, e la necessità di ridurre i costi hanno spinto
43 verso l'automazione anche gli esami di laboratorio dedicati all'autoimmunologia [49]. Pertanto,
44 anche con l'obiettivo di rendere più semplice e standardizzata la ricerca degli ANA, l'industria
45 biomedica ha investito risorse nella messa a punto di metodi immunometrici automatizzati (ELISA,
46 MBA, CLIA, FEIA, ALBIA ecc.) [50-53] da impiegare nella prima fase della diagnostica delle
47 MRA in sostituzione dell'IFI. Queste nuove metodologie immunometriche sono generalmente
48 caratterizzate sul piano strettamente operativo da superiore produttività, maggiore riproducibilità e
49 semplicità d'uso, costi gestionali inferiori rispetto al metodo IFI [54]. Le nuove tecnologie sono
50 state adottate in numerosi Laboratori clinici anche perché implementabili su piattaforme analitiche
51 comuni ad altri test di laboratorio. Tuttavia, le performance analitiche e diagnostiche di queste
52 tecniche sono molto diverse tra loro e i risultati non sempre sono correlati a quelli ottenuti con il

metodo IFI [55, 56], al punto da generare disorientamento e confusione nella valutazione clinica dei risultati di test ANA eseguiti con differenti sistemi analitici.

Dai dati della letteratura emerge che fino al 35% dei pazienti con LES e test ANA positivo in IFI risulta negativo con metodi alternativi [57-61]. I motivi alla base della minore sensibilità diagnostica dei metodi immunometrici rispetto all'IFI sono essenzialmente legati a tre ordini di fattori: a) la preparazione degli antigeni (sia estrattivi che ricombinanti) non permette sempre una completa riproducibilità conformazionale delle molecole; b) i sistemi immunometrici non includono tutti gli antigeni presenti nelle cellule HEp-2 [62, 63]; c) non tutti i sistemi antigene/anticorpo responsabili di una positività in IFI sono al momento disponibili nei test immunometrici [64-76]. Nel 2009 l'*American College of Rheumatology* (ACR) ha espresso la propria posizione sulle modalità di ricerca degli ANA elaborando uno specifico documento di consenso che riconferma l'IFI quale metodo analitico di riferimento per la ricerca degli ANA [77]. Lo stesso documento raccomanda che i metodi alternativi siano utilizzati solo qualora le loro performance diagnostiche siano sovrapponibili o superiori rispetto a quelle della tecnica IFI.

Successivamente, la revisione di nove studi di comparazione di risultati di ANA, eseguiti in parallelo in IFI e con vari metodi immunometrici su 705 pazienti con LES, ha evidenziato una maggiore sensibilità diagnostica del metodo IFI rispetto agli altri metodi indagati e ha confermato questa tecnica quale *gold standard* per la determinazione degli ANA [78]. I saggi immunometrici come FEIA, CLIA ed ELISA includono relativamente pochi antigeni rispetto a quelli presenti nelle cellule HEp-2 intatte, essendo generalmente basati su combinazioni variabili di 6-18 antigeni purificati o ricombinanti, ai quali vengono talora aggiunti estratti di cellule HEp-2, con l'intento di assicurare il rilevamento di una gamma più ampia di autoanticorpi [79-81]. Questi test, caratterizzati in genere da buone prestazioni analitiche, hanno tuttavia sensibilità e specificità diagnostica variabili per le diverse MRA. In uno studio più recente solo il 51% dei pazienti con sclerodermia risultava positivo con il test immunometrico in valutazione, rispetto al 91% in IFI, perchè incapace di evidenziare gli anticorpi anti-RNA polimerasi III [63]. Quindi, quando per la ricerca degli ANA viene utilizzato un test immunometrico devono essere elencate le specificità antigeniche presenti nel sistema e, in caso di risultato negativo, deve essere esplicitato che la negatività al test non equivale alla negatività verso tutti gli antigeni intracellulari, ma soltanto verso quelli indagati.

Raccomandazione. Per la ricerca degli ANA si raccomanda l'utilizzo della metodologia di immunofluorescenza indiretta, usando cellule HEp-2 come substrato, in quanto le procedure analitiche alternative (ELISA, MBA, CLIA, FEIA, ALBIA ecc.), non sono al momento in possesso di analoga sensibilità diagnostica.

Qualità globale delle evidenze: alta

Forza della raccomandazione: forte

2f. *Nell'eventualità che la ricerca degli ANA venga eseguita con metodologie diverse dall'IFI, nel referto possono essere utilizzati termini quali "ANA test" o "ANA screen" per descrivere l'indagine diagnostica?*

1 Le tecnologie e le piattaforme diagnostiche disponibili per la ricerca degli ANA e degli
2 autoanticorpi correlati sono cresciute notevolmente negli ultimi 10 anni. Metodi immunoenzimatici
3 [51, 60, 82-86], *dot blot* [87], *line immunoassay* (LIA) [85, 88-90], chemiluminescenza [91-93], e
4 più recentemente i test multiparametrici immunometrici, basati su tecnologie quali *addressable*
5 *laser bead arrays* (ALBIA) [94-102], *microarray* planari e non-planari [103-111], particelle
6 *nanobarcodes* [112] e altre nuove e promettenti tecnologie sono in continuo sviluppo e vengono
7 progressivamente rese disponibili. La capacità di rilevare oltre 30 autoanticorpi con una sola goccia
8 di sangue è oggi alla portata del Laboratorio e tecnologie come le particelle *nanobarcodes*
9 potrebbero aumentare in maniera esponenziale la possibilità di ricercare autoanticorpi
10 contemporaneamente con un solo test (fino a 80.000 analiti) [113]. Attualmente, però, i test
11 alternativi disponibili sono caratterizzati da performance analitiche non sovrapponibili al test ANA-
12 IFI su cellule HEp2 [78, 85, 88] a causa, in particolare, di una ridotta sensibilità nei soggetti con
13 LES e una specificità diagnostica variabile nei confronti delle singole MRA. In considerazione di
14 ciò, termini come ANA test, ANA screen e similari non devono essere utilizzati per descrivere
15 metodi analitici alternativi all'IFI, poiché contribuiscono a generare confusione e incertezza
16 nell'interpretazione dei risultati. Risultati falsi negativi nella ricerca degli ANA, ottenuti con
17 metodologie analitiche diverse dall'IFI basate sull'utilizzo di un numero ristretto di specificità
18 antigeniche e non chiaramente esplicitate, potrebbero essere causa di mancata o tardiva diagnosi di
19 patologie autoimmuni di rilevanza clinica [5]. L'esplicita descrizione della procedura analitica
20 scelta e degli autoantigeni presenti sulla fase solida dei test immunometrici è requisito
21 indispensabile per fare chiarezza sugli autoanticorpi effettivamente ricercati e sull'accuratezza
22 diagnostica che ogni singola metodologia può presentare nelle diverse situazioni cliniche [114-117].

31 ***Raccomandazione. Nell'eventualità che la ricerca degli ANA venga eseguita esclusivamente con***
32 ***metodologie diverse dall'IFI, basate su un numero definito di antigeni cellulari, il test non deve***
33 ***essere denominato genericamente "ANA screen" o "ANA-test" per evitare errori***
34 ***nell'interpretazione e nel confronto di risultati generati da tecniche analitiche differenti. I***
35 ***Laboratori che utilizzano tali metodiche analitiche devono specificare nel referto la metodologia***
36 ***analitica utilizzata e le specificità anticorpali ricercate.***

40 Qualità globale delle evidenze: moderata
41 Forza della raccomandazione: forte

44
45 **2g. Al fine di una migliore discriminazione tra popolazione sana e malata, quale diluizione iniziale**
46 **si deve utilizzare per il test ANA in IFI e quali criteri devono essere adottati per la valutazione dei**
47 **risultati del test?**
48
49

50 L'utilizzo della linea cellulare HEp-2 (cellule epiteliali di carcinoma della laringe umana) come
51 substrato per il test ANA in IFI presenta un'elevata sensibilità diagnostica in pazienti con MRA, ma
52 una ridotta specificità (presenza di risultati positivi in individui sani e in pazienti affetti da patologie
53 non reumatiche autoimmuni). Uno studio multicentrico riportava che il 31,7% degli individui
54 normali era ANA positivo alla diluizione di 1:40 e che la frequenza di falsi positivi si riduceva al
55 13,3% alla diluizione di 1:80 e al 5,0% a 1:160. Poiché circa il 95% di sieri di pazienti con LES era
56 positivo alla diluizione di 1:160, a tale diluizione è possibile ottenere una migliore discriminazione
57 tra un risultato ANA positivo clinicamente significativo e un risultato ANA di scarso significato
58
59
60
61
62
63
64
65

1 clinico. Tuttavia, poiché la frequenza di positività degli ANA con questo *cut-off* era dell'87% nella
2 SSc e del 74% nella sindrome di Sjögren [29], la diluizione iniziale 1:160 del siero, che secondo
3 alcuni autori costituirebbe la migliore scelta economica per lo screening degli ANA in IFI [118],
4 non garantisce una sensibilità diagnostica ottimale per tutte le MRA. Inoltre, campioni ANA-
5 positivi a titoli inferiori a 1:160 sono positivi in circa il 5% dei casi ai test di secondo livello (anti-
6 dsDNA, anti-antigeni intracellulari specifici ecc.) [51, 119-121].

7
8
9 Le evidenze sul significato clinico degli ANA e sul loro valore predittivo per MRA riguardano
10 prevalentemente la popolazione adulta; gli studi che trattano tale argomento in età pediatrica sono
11 poco consistenti per l'esiguità della casistica presa in esame, tanto che sarebbe auspicabile
12 consolidare tali evidenze nei bambini [122]. I dati della letteratura a oggi disponibili, comunque,
13 concordano sull'inutilità di utilizzare una diluizione di screening inferiore rispetto a quella usata per
14 la popolazione adulta [123]. Uno studio più recente [124] ha evidenziato che i bambini che erano
15 risultati ANA positivi alla diluizione di 1:80 (12% di quella casistica) non manifestavano segni e
16 sintomi di MRA, in accordo con i risultati di un altro studio [125] nel quale solo il 55% di bambini
17 con ANA >1:160 andava incontro a una diagnosi certa di MRA.

18
19
20
21
22 **Raccomandazione.** *Nella determinazione degli ANA in IFI si raccomanda di utilizzare una*
23 *diluizione iniziale di 1:80, riportando tale dato nel referto. Un titolo $\geq 1/160$ va considerato*
24 *positivo; un titolo di 1:80 va considerato basso positivo; un titolo $< 1:80$ va considerato negativo.*
25 *Per la fascia di età pediatrica, in attesa di ulteriori studi che consolidino le evidenze a oggi*
26 *disponibili e in accordo con queste, si raccomanda l'utilizzo della stessa diluizione di partenza*
27 *per lo screening e dei medesimi criteri di valutazione dei risultati proposti per la popolazione*
28 *adulta.*

29
30
31
32 Qualità globale delle evidenze: moderata

33
34 Forza della raccomandazione: forte

35
36
37
38 **2h.** *Nella ricerca degli ANA con metodo IFI devono essere riportati nel referto anche il pattern*
39 *fluoroscopico e il titolo?*

40
41
42 Il quadro fluoroscopico osservabile in IFI su cellule HEp-2 è correlato alla specificità anticorpale,
43 ovvero alla struttura antigenica bersaglio, nucleare, mitotica o citoplasmatica [9] (Tabella 3). Al
44 momento, dei circa 30 quadri fluoroscopici rilevabili solo circa la metà è ragionevolmente associata
45 a quadri clinici; tra i quadri di fluorescenza nucleare patologia-associati i più frequenti sono
46 costituiti dalla fluorescenza omogenea (dsDNA, nucleosomi, istoni), granulare (snRNP, Sm,
47 Ro/SSA, La/SSB), centromerica (CENP-A,B,C), nucleolare (PM/Scl, nucleolina, fibrillarina, RNA
48 polimerasi I, hUBF), granulare-nucleolare (DNA-topoisomerasi I o Scl70), mentre tra i più rari si
49 annoverano il quadro pleomorfo o PCNA (ciclina), il quadro puntiforme o *nuclear dots* (proteina
50 Sp100), il quadro di membrana (laminine A, B, C, gp210). I quadri fluoroscopici citoplasmatici
51 patologia-associati sono di riscontro relativamente poco frequente e sono costituiti dalla
52 fluorescenza granulare (aminoacil-tRNA sintetasi), mitocondriale (proteine del complesso piruvato-
53 deidrogenasi), ribosomiale (ribonucleoproteine ribosomiali), dei costituenti del citoscheletro (actina,
54 vimentina ecc.), dell'apparato di Golgi e simil-lisosomiale. Per quanto riguarda i rari quadri
55 fluoroscopici mitotici patologia-associati sono da annoverare la fluorescenza del fuso (tubulina), dei
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1 centrioli (enolasi), dei poli o NuMA (*nuclear mitotic apparatus protein*), del corpo intermedio o
2 *midbody* e della proteina cromosomiale CENP-F, la cui presenza è però associata con neoplasie o
3 epatiti virali B e C [126]. Tuttavia, la positività ANA con un determinato pattern fluoroscopico non
4 sempre è specifica per la presenza di una malattia autoimmune o, comunque, di uno stato
5 patologico. Per esempio, in un recente studio di comparazione tra individui sani e affetti da MRA,
6 alcuni ricercatori hanno suggerito che la positività per ANA con pattern fluoroscopico *dense fine*
7 *speckled* (DFS70) sia presente prevalentemente in soggetti non affetti da MRA [127-130].

8 L'uso di una terminologia univoca per definire i pattern fluoroscopici ANA costituisce un
9 prerequisito indispensabile per garantire risultati universalmente comprensibili e confrontabili con
10 quelli generati da altri Laboratori. Nonostante i numerosi tentativi per standardizzare le procedure
11 analitiche utilizzate per la ricerca degli autoanticorpi diretti nei confronti degli antigeni intracellulari
12 e la disponibilità di specifici sieri di riferimento, a tutt'oggi l'obiettivo non è ancora stato raggiunto
13 [131] e non è stata definita una terminologia condivisa per descrivere i quadri fluoroscopici
14 riconoscibili sulle cellule HEp-2 [9, 132]. Tra le ragioni alla base della mancata standardizzazione
15 le più importanti sono la soggettività dell'interpretazione del pattern e le differenze dei diversi
16 substrati di cellule HEp-2 presenti in commercio [23, 131].

17 Recentemente, riaffermato il ruolo centrale della ricerca degli ANA con metodo IFI, sono state
18 sviluppate tecnologie completamente automatizzate non solo per l'allestimento dei preparati, ma
19 anche per l'acquisizione e la valutazione delle immagini fluoroscopiche. Questi cosiddetti sistemi
20 "esperti" sono capaci di classificare con sufficiente accuratezza i campioni esaminati per la ricerca
21 degli ANA in negativi e positivi. In caso di positività possono, attraverso l'utilizzo di complessi
22 algoritmi, suggerire il possibile pattern fluoroscopico, nell'ambito di quelli più comunemente
23 osservati, e di stimare il titolo anticorpale [41, 133-142]. Nonostante gli attuali limiti di questi
24 sistemi [143-145] che al momento ne consigliano un impiego controllato, è prevedibile che la loro
25 evoluzione e progressiva introduzione nei Laboratori di autoimmunità determinerà una significativa
26 riduzione della soggettività interpretativa sia del pattern sia del titolo anticorpale e, di conseguenza,
27 rappresenterà un fattore di promozione per l'armonizzazione della descrizione dei quadri
28 fluoroscopici d'interesse diagnostico e della quantificazione della intensità di fluorescenza.

29 La presenza di ANA a titolo elevato ($\geq 1:640$) dovrebbe far sospettare la presenza di una malattia
30 autoimmune, mentre il rilievo di ANA a basso titolo (1:80), associato a pochi o assenti segni o
31 sintomi clinici, si associa a una più bassa probabilità di MRA [96, 146]. Le manifestazioni cliniche
32 associate a determinati quadri fluoroscopici (e specificità autoanticorpali) sono più frequenti in
33 pazienti con titoli autoanticorpali elevati: la sclerodattilia, il fenomeno di Raynaud e le vasculopatie
34 sono più spesso associate agli anticorpi anti-centromero ad alto titolo e la MCTD è associata a
35 elevati titoli di autoanticorpi anti-U1RNP.

36 È importante sottolineare che al di là della possibile associazione tra determinati pattern e malattie
37 autoimmuni, la corretta assegnazione del pattern riveste un'elevata utilità pratica per il patologo
38 che, proprio in base al tipo di pattern, orienta la scelta dei test e dei metodi da utilizzare per
39 l'identificazione degli anticorpi anti-antigeni intracellulari specifici [147].

40 **Raccomandazione.** *Nella refertazione del test ANA eseguito con metodo IFI su cellule HEp-2 si*
41 *raccomanda di riportare il risultato qualitativo (presenti o assenti), il titolo (e la diluizione di*
42 *partenza), il pattern fluoroscopico con descrizione morfologica (omogeneo, granulare ecc.) e un*
43 *commento. Eventuali positività multiple dovranno essere refertate e descritte separatamente. Il*
44 *quadro fluoroscopico, anche se solo in alcuni casi riveste importanza diagnostica certa, orienta*

1 *nella scelta dei test di approfondimento per la ricerca degli autoanticorpi anti-antigeni cellulari*
2 *specifici. L'impiego di sistemi cosiddetti esperti, nei quali l'interpretazione del pattern avvenga in*
3 *maniera automatizzata, per il momento deve essere limitato alla distinzione tra campioni positivi*
4 *e negativi.*

5
6 Qualità globale delle evidenze: alta

7
8 Forza della raccomandazione: forte

9 10 11 **Sezione 3. Ricerca degli anticorpi anti-antigeni intracellulari specifici (cosiddetti** 12 **ENA).**

13
14
15
16 **3a.** *Nei pazienti con sospetto clinico di MRA, la ricerca degli anticorpi diretti contro i diversi*
17 *antigeni intracellulari specifici, cosiddetti ENA, è appropriata solo in caso di positività ANA?*

18
19
20 In fase diagnostica iniziale, in pazienti con sintomi sospetti per MRA il test di ingresso è
21 rappresentato dalla determinazione degli ANA in IFI [4, 39, 51, 120, 147]. Quando gli ANA sono
22 presenti a un titolo $\geq 1:160$, il pattern di fluorescenza indirizza la ricerca di autoanticorpi diretti
23 verso uno o più autoantigeni intracellulari specifici (cosiddetti ENA) [121, 147]. Tuttavia, è bene
24 sottolineare che anche se esiste una correlazione tra i pattern IFI e la specificità antigenica
25 riconosciuta dagli autoanticorpi, questa associazione non è assoluta e la specificità antigenica non
26 può essere dedotta dal solo quadro fluoroscopico in IFI [148-150].

27
28 È utile ricordare che alcuni autoanticorpi, soprattutto quelli associati alla presenza di alcune MRA,
29 quali la sindrome di Sjögren e la DM/PM, possono non essere rilevati mediante il test ANA-IFI
30 [151-153]. Pertanto, la loro ricerca è appropriata in caso di forte sospetto clinico per MRA anche
31 nel caso che il test ANA sia negativo [4, 35, 39, 154-157]. In particolare, in corso d'inquadramento
32 diagnostico di sindrome di Sjögren, lupus neonatale e lupus cutaneo subacuto dovrebbero sempre
33 essere ricercati con metodo specifico gli anticorpi anti-SSA/Ro e, nel sospetto clinico di DM/PM,
34 gli anticorpi anti-Jo1. Infine, nelle donne gravide a rischio vanno ricercati gli autoanticorpi anti-Ro
35 (Ro52 e/o Ro60) di classe IgG a prescindere dalla positività o meno degli ANA perché, se presenti,
36 possono essere causa di blocco atrio-ventricolare nel neonato. Questa seria complicazione perinatale
37 è stata osservata in circa l'1% delle gravidanze di gestanti anti-Ro positive [158, 159].

38
39
40
41
42
43
44
45 **Raccomandazione.** *In presenza di un risultato ANA-IFI positivo, maggiori informazioni*
46 *diagnostiche sono ottenibili con la caratterizzazione delle specificità anticorpali dirette contro i*
47 *diversi antigeni intracellulari. Si procede alla determinazione degli anticorpi anti-antigeni*
48 *intracellulari specifici quando la positività ANA in IFI è uguale o superiore al titolo 1:160. La*
49 *ricerca degli anticorpi anti-antigeni intracellulari specifici può essere eseguita, anche con ANA*
50 *assenti o a basso titolo ($< 1:160$), qualora il paziente presenti sintomi clinici o dati di laboratorio*
51 *suggestivi di malattia autoimmune. In caso di negatività del test ANA in IFI e sospetto clinico di*
52 *sindrome di Sjögren, lupus neonatale o lupus cutaneo subacuto dovrebbero comunque essere*
53 *ricercati anticorpi anti-SSA/Ro60 e Ro52. La ricerca degli anticorpi anti-Ro di origine materna,*
54 *invece, va eseguita a prescindere dalla positività degli ANA come marker prognostico di*
55 *trasmissione placentare e rischio di blocco cardiaco congenito fetale. In caso di sospetta DM/PM*
56 *si raccomanda la ricerca degli anticorpi anti-Jo1.*

1 Qualità globale delle evidenze: alta
2
3 Forza della raccomandazione: forte
4
5

6 **3b.** *Nei pazienti con sospetto di MRA e/o che siano risultati ANA positivi, quali anticorpi diretti*
7 *contro gli antigeni intracellulari specifici devono essere ricercati in prima istanza, nell'ottica di un*
8 *percorso efficace sul piano diagnostico e di contenimento nei costi?*
9
10

11 La varietà di autoantigeni intracellulari bersaglio degli autoanticorpi è estremamente ampia:
12 nell'ottica di un corretto rapporto costo-beneficio è ragionevole limitare la ricerca agli autoanticorpi
13 ai quali è stata assegnata importanza nella diagnosi clinica, selezionati sulla base delle
14 caratteristiche del pattern fluoroscopico o del sospetto clinico. Tra questi i più comuni sono gli anti-
15 Ro52 e Ro60, anti-La, anti-Sm, anti-RNP o U1RNP, anti-Scl70, anti-Jo1, anti-CENP-B, anti-RNA
16 polimerasi III [3, 160, 161]. Tuttavia, alla positività del test ANA in IFI, anche con pattern
17 fluoroscopici tipici, non sempre corrisponde la positività per uno degli antigeni intracellulari
18 specifici descritti. In queste situazioni e se il sospetto clinico per MRA è concreto si può estendere
19 la ricerca ad autoanticorpi diretti verso antigeni intracellulari specifici di più raro riscontro quali
20 istoni, nucleosomi, PCNA, Ku, Sp100, CENP-A, fibrillarina e Th/To [8, 162-165]. In caso di
21 positività citoplasmatica granulare e/o diffusa sarà inutile e inappropriato procedere alla ricerca,
22 singola o combinata, dei citati autoanticorpi specifici e risulterà invece utile testare per anticorpi
23 AMA-M2 e anti-proteina P ribosomiale. Nel sospetto di miopatie infiammatorie, indipendentemente
24 dall'esito della ricerca degli ANA in IFI, oltre alla determinazione degli anticorpi anti-Jo1, sarà
25 opportuno procedere alla ricerca combinata degli autoanticorpi miosite-specifici o miosite-associati:
26 Mi-2, Ku, altre anti-aminoacil-tRNA sintetasi (PL-7, PL-12, EJ, OJ), SRP e PM-Scl75/100 per
27 contribuire a un corretto inquadramento diagnostico nonché alla definizione del subset clinico [154,
28 166, 167].
29

30 Sono oggi disponibili metodi di *line-immunoassay* e di *dot-blot* che comprendono profili anticorpali
31 patologia-orientati o anche pattern IFI-orientati (nucleolare, citoplasmatico) [85, 87-90] e metodi
32 CLIA o FEIA, la cui fase solida è costituita da una miscela di antigeni (cosiddetti CTD screen) che,
33 con un unico test, consentono la rilevazione di più anticorpi [84, 168, 169]. I primi che, se positivi,
34 consentono anche l'immediata individuazione della specificità anticorpale, possono essere utilizzati
35 come test di secondo livello in presenza di chiare indicazioni cliniche; i secondi trovano migliore
36 collocazione come test di secondo livello per lo screening degli antigeni intracellulari specifici. In
37 ogni caso, la migliore strategia nell'utilizzo dei metodi dipende dalle caratteristiche del Laboratorio,
38 dalla prevalenza di MRA nella popolazione di pazienti afferenti, dalla probabilità pre-test che il
39 paziente sia affetto da una determinata MRA [170, 171].
40

41 I risultati negativi dei test per la ricerca di anticorpi anti-antigeni intracellulari specifici possono
42 essere utili per escludere alcune ipotesi diagnostiche e le singole specificità antigeniche ricercate
43 devono sempre essere riportate nel referto.
44

45 Per la popolazione pediatrica non sono al momento disponibili dati che suggeriscano la necessità di
46 utilizzare algoritmi diagnostici diversi da quelli degli adulti.
47

48 **Raccomandazione.** *La varietà di autoantigeni riconosciuti dagli ANA è estremamente ampia.*
49 *Pertanto, sia per migliorare l'utilità clinica del risultato sia per un corretto rapporto*
50

1 *costo/beneficio è opportuno limitare la ricerca agli autoanticorpi compatibili con il quadro*
2 *fluoroscopico osservato nel test ANA, nell'ambito di quelli caratterizzati da importanza*
3 *diagnostica certa o individuati come criteri di classificazione delle connettiviti autoimmuni (anti-*
4 *SSA/Ro60 e Ro52 e, anti-SSB/La, anti-Sm, anti-U1RNP, anti-Scl70, anti-Jo1, anti-RNA*
5 *polimerasi III).*

6 *La ricerca delle specificità anticorpali dirette contro diversi antigeni intracellulari di riscontro*
7 *meno frequente viene raccomandata solo:*

- 8 • *in caso di positività del test ANA in IFI con pattern nucleare tipico; in questo caso la*
9 *ricerca può essere estesa ad anticorpi anti-istoni, nucleosomi, PCNA, Ku, Sp100, CENP-*
10 *A e fibrillarina;*
- 11 • *in caso di positività citoplasmatica granulare e/o diffusa risulterà utile testare per AMA-*
12 *M2 e anticorpi anti-proteina P ribosomiale;*
- 13 • *in caso di sospetta miopatia infiammatoria è utile per un corretto inquadramento*
14 *diagnostico e per definire l'appartenenza a un subset clinico di malattia la ricerca di*
15 *autoanticorpi diretti verso le seguenti specificità antigeniche: Mi-2, Ku, anti-aminoacil-*
16 *tRNA sintetasi (PL-7, PL-12, EJ, OJ ecc.), SRP, PM-Scl75/100.*

17 *I risultati dei test per la ricerca di anticorpi anti-antigeni intracellulari specifici devono essere*
18 *refertati separatamente, anche se negativi, descrivendo nel referto le specificità presenti nel*
19 *saggio. Per la popolazione pediatrica si consiglia di seguire le stesse indicazioni suggerite per la*
20 *popolazione adulta, non esistendo al momento evidenze che ne contrastino o ne supportino*
21 *l'efficacia.*

22 Qualità globale delle evidenze: moderata

23 Forza della raccomandazione: forte

24 **3c.** *Al fine di perseguire l'appropriatezza nella fase prescrittiva è vantaggioso utilizzare la*
25 *metodologia di richiesta definita "ANA-reflex"?*

26 Nella logica di promuovere l'appropriatezza prescrittiva di esami ad alto rischio di
27 inapproprietezza, tra cui quelli relativi alla diagnostica autoimmune, e per evitare agli assistiti il
28 disagio di dover ritornare in Laboratorio e dal medico per eventuali esami d'approfondimento, si sta
29 affermando in diverse realtà sanitarie regionali la metodologia di richiesta definita "reflex test" che
30 prevede:

- 31 • richiesta dettata da sospetto diagnostico e corredata di segni e/o sintomi clinici;
- 32 • esecuzione di esami in successione logica con definizione di un algoritmo diagnostico
33 ragionato e basato su linee guida ed evidenze disponibili [172].

34 In realtà, nella diagnostica autoimmune e in particolare nella ricerca degli ANA nel percorso
35 diagnostico per le MRA si utilizzano già da tempo algoritmi a cascata [121, 147, 173].

36 La richiesta di ANA-reflex comporta, quindi, l'esecuzione della ricerca degli ANA in prima battuta
37 e di eventuali altri esami di approfondimento, quali anticorpi anti-dsDNA e anti-antigeni
38 intracellulari specifici, in relazione al risultato del test ANA, al titolo e pattern fluoroscopico e alle
39 notizie cliniche [39, 174]. In caso di sospetto clinico di MRA e test ANA positivo, la selezione dei
40 test di approfondimento dovrebbe essere effettuata sulla base delle associazioni riportate nella

1 **Tabella 4.** Pattern di tipo *few nuclear dots*, nucleolare a basso titolo, fuso mitotico, *midbody*, CENP-
2 F, simil-lisosomiale, Golgi e citoscheletro non necessitano di approfondimento con test di secondo
3 livello [172]. In presenza di un pattern suggestivo per anti-DFS70 dovrebbe essere eseguito un test
4 di conferma per tale marcatore ed escludere la presenza di altri marcatori associati a MRA [129,
5 175].

6 Anche in caso di risultato ANA negativo o positivo a basso titolo è possibile attivare test di secondo
7 livello qualora vengano descritti nella prescrizione segni e sintomi fortemente indicativi di una
8 definita MRA.
9

10 I pattern fluoroscopici ANA suggestivi per la presenza di marcatori associati a epatopatie
11 autoimmuni dovrebbero essere confermati da test antigene-specifici (Sp100, AMA-M2 ecc.). Il
12 referto del test ANA-reflex deve essere accompagnato da un commento in grado di illustrare l'iter
13 diagnostico ed eventualmente il significato dei test di approfondimento eseguiti. È importante
14 sottolineare che gli esami di approfondimento, selezionabili in alcuni contesti anche in modo
15 automatico dal sistema informatico del Laboratorio, nella modalità *reflex test* non necessitano di
16 nuove richieste del medico, di ulteriori raccolte di campioni di sangue e non provocano
17 allungamento dei tempi di risposta [176].
18
19
20
21
22
23

24 **Raccomandazione.** *Nel sospetto di MRA, la metodologia di richiesta di tipo reflex (ANA-reflex)*
25 *può essere praticata efficacemente per i pazienti ambulatoriali, sempre che la stessa sia corredata*
26 *da informazioni cliniche e che siano definite le indagini di secondo livello da associare ai diversi*
27 *quadri fluoroscopici del test ANA positivo.*
28
29
30

31 Qualità globale delle evidenze: bassa

32 Forza della raccomandazione: debole
33
34
35

36 **3d.** *Quali tecniche di laboratorio possono essere utilizzate per ricercare gli autoanticorpi anti-*
37 *antigeni intracellulari specifici con accuratezza diagnostica e analitica adeguate?*
38
39

40 I metodi di laboratorio oggi disponibili e abitualmente impiegati sono: ELISA, WB, IB, FEIA,
41 CLIA, MBA, ALBIA, LIA, *micro-array*. Allo stato attuale non esiste un metodo in grado di
42 soddisfare da solo i migliori requisiti di sensibilità e specificità clinica, precisione analitica, facilità
43 di esecuzione, impiego di tecnologia, reperibilità e costo [170]. In particolare, l'accuratezza
44 diagnostica dipende sia dalle caratteristiche chimico, fisiche e spaziali dei diversi antigeni, sia dalle
45 modalità di preparazione degli stessi, che non sempre garantiscono la corretta riproduzione delle
46 molecole presenti nelle cellule intatte. Inoltre, anche i diversi tipi di supporto a cui sono adesi gli
47 antigeni sono in grado di condizionare la corretta esposizione epitopica e di conseguenza la
48 reattività [58, 177-181]. Pertanto, un corretto iter diagnostico per la ricerca degli anticorpi anti-
49 antigeni intracellulari specifici deve avvalersi di più approcci metodologici da utilizzarsi anche in
50 combinazione, la cui scelta dipende dalle indicazioni cliniche e dal pattern di fluorescenza
51 riscontrato nel test ANA. Per i motivi esposti, la metodologia analitica impiegata va sempre
52 specificata nel referto.
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1 **Raccomandazione. I metodi di laboratorio attualmente disponibili per la ricerca nel siero degli**
2 **autoanticorpi diretti nei confronti di antigeni intracellulari specifici sono numerosi e**
3 **caratterizzati da performance analitiche e diagnostiche variabili da metodo a metodo e per**
4 **singola specificità anticorpale nell'ambito dello stesso metodo. Pertanto, è opportuno avvalersi di**
5 **differenti approcci metodologici. Si raccomanda, inoltre, di riportare nel referto il metodo o i**
6 **metodi utilizzati.**

7
8
9 Qualità globale delle evidenze: moderata

10 Forza della raccomandazione: forte

11
12
13
14 **3e. Nei pazienti con diagnosi di MRA, la misura della concentrazione degli autoanticorpi diretti**
15 **verso antigeni intracellulari specifici fornisce informazioni aggiuntive per il monitoraggio o la**
16 **prognosi della malattia ed è utile la ripetizione di questi test durante il decorso clinico della**
17 **malattia?**

18
19
20
21 La concentrazione degli autoanticorpi diretti nei confronti di antigeni intracellulari specifici non ha
22 correlazione certa nelle MRA né con la diagnosi, il decorso e la prognosi della malattia, né con la
23 valutazione dell'efficacia della terapia, con l'unica eccezione della connettivite mista, nella quale un
24 alto titolo degli autoanticorpi anti-U1RNP rappresenta il principale criterio diagnostico della
25 sindrome. La concentrazione sierica degli anticorpi anti-antigeni intracellulari specifici tende infatti
26 a fluttuare nel tempo in maniera non correlata all'andamento clinico [182]. Gli autoanticorpi diretti
27 nei confronti di antigeni intracellulari specifici sono generalmente già presenti al momento della
28 diagnosi, per cui non è giustificata la ripetizione in assenza di una variazione del quadro clinico
29 [39].

30
31
32
33
34 **Raccomandazione. La determinazione quantitativa degli autoanticorpi diretti nei confronti di**
35 **antigeni intracellulari specifici non è utile per la diagnosi, il monitoraggio, la prognosi della**
36 **malattia, né per valutare l'efficacia della terapia, con l'unica eccezione della MCTD, nella quale**
37 **la presenza di elevate concentrazioni di autoanticorpi anti-U1RNP rappresenta il principale**
38 **criterio diagnostico. Non è raccomandata la ripetizione del test se non intervengono variazioni di**
39 **rilievo del quadro clinico.**

40
41
42
43 Qualità globale delle evidenze: moderata

44 Forza della raccomandazione: forte

45 46 47 48 49 **Sezione 4. Determinazione degli autoanticorpi anti-dsDNA: appropriatezza della** 50 **richiesta e scelta della metodologia analitica**

51
52
53 **4a. Nei soggetti sospetti di essere affetti da MRA, quando è appropriata la richiesta di**
54 **determinazione degli autoanticorpi anti-dsDNA?**

55
56
57 L'esistenza di autoanticorpi anti-DNA in pazienti con LES è nota fin dagli anni Cinquanta. Ben
58 presto è risultato evidente che la molecola di DNA presentava numerosi epitopi e che di
59 conseguenza gli anticorpi anti-DNA comprendevano un gruppo eterogeneo di immunoglobuline con
60

1 differenti specificità. Gli anticorpi identificati più comunemente sono quelli diretti verso il DNA a
2 singola elica (ssDNA), i cui determinanti antigenici sembrano essere localizzati nelle sequenze
3 basiche puriniche e pirimidiniche e in particolare in zone ricche di G-C e A-T; gli anticorpi rivolti
4 verso il DNA nativo a doppia elica (dsDNA), invece, riconoscono epitopi localizzati lungo lo
5 scheletro desossiribosio-fosfato. A fronte di una notevole aspecificità degli anticorpi anti-ssDNA,
6 gli anticorpi anti-dsDNA sono specifici (95%) per il LES e presenti nei soggetti affetti con
7 prevalenza variabile tra 40% e 80%, così da costituire uno dei criteri classificativi del LES definiti
8 dall'ACR [12, 183]. Gli autoanticorpi anti-dsDNA sono i principali responsabili del quadro
9 fluoroscopico nucleare omogeneo in IFI, ma possono essere presenti anche con un quadro nucleare
10 granulare o citoplasmatico, in quanto spesso associati alla presenza di altre specificità
11 autoanticorpali.

12 In rari casi (< 1%), pur in presenza di anticorpi anti-dsDNA, il test ANA può risultare negativo.
13 Pertanto, quando vi sia un forte sospetto clinico di LES è utile eseguire la ricerca di anticorpi anti-
14 dsDNA anche se il test ANA di screening è negativo.

15 ***Raccomandazione. La determinazione degli autoanticorpi anti-dsDNA è raccomandata in***
16 ***presenza di sintomi riferibili a LES e in caso di positività degli ANA a un titolo uguale o***
17 ***superiore a 1:160, in particolar modo quando sia presente un quadro omogeneo di fluorescenza***
18 ***nucleare. Benché sia rara la presenza degli anticorpi anti-dsDNA in caso di negatività degli***
19 ***ANA, si raccomanda comunque la determinazione degli autoanticorpi anti-dsDNA qualora***
20 ***sussista un forte sospetto clinico di LES.***

21 Qualità globale delle evidenze: alta

22 Forza della raccomandazione: forte

23 ***4b. Tenendo conto dell'accuratezza diagnostica delle varie metodologie analitiche, la***
24 ***determinazione degli anticorpi anti-dsDNA può essere eseguita con tecniche immunometriche***
25 ***(ELISA, CLIA, FEIA, ecc.) al posto dei metodi CLIFT e radioimmunometrici?***

26 L'utilità diagnostica e prognostica del dosaggio degli autoanticorpi anti-dsDNA ha portato allo
27 sviluppo di numerose tecniche per la loro determinazione: tra queste le più comunemente utilizzate
28 sono l'IFI su *Crithidia luciliae* (CLIFT) e vari immunodosaggi (CLIA, FEIA, ELISA ecc.). La
29 tecnica di Farr che per anni ha rappresentato il metodo di elezione ha tuttavia lo svantaggio di
30 utilizzare isotopi radioattivi e la necessità di disporre di ambienti dedicati all'esecuzione del test e
31 allo smaltimento dei reattivi. Questa esigenza, insieme al miglioramento delle tecniche alternative,
32 ha progressivamente limitato l'applicazione di questo metodo nei Laboratori clinici [184-188]. La
33 patogenicità degli anticorpi anti-dsDNA è legata alla maturazione dell'affinità anticorpale,
34 all'isotipo IgG o al rapporto IgG/IgM, all'attivazione del complemento e alla cross-reattività con
35 componenti della membrana basale glomerulare [189, 190]. L'utilità clinica dei test per la ricerca
36 degli anticorpi anti-dsDNA dipende dalla loro capacità di rilevare autoanticorpi patogenetici e di
37 misurarli con un approccio quantitativo standardizzato [191, 192]. Il CLIFT è un metodo altamente
38 specifico ma non molto sensibile, in grado di evidenziare anticorpi ad avidità alta e intermedia, che
39 permette l'individuazione delle varie classi anticorpali, ma non consente una determinazione

1 quantitativa accurata [193, 194]. Le tecniche immunometriche (CLIA, FEIA, ELISA ecc.) sono
2 sensibili, in grado di evidenziare le diverse classi immunoglobuliniche, quantitative, automatizzabili
3 e non operatore dipendente [195]. Per anni il limite delle metodologie immunometriche è consistito
4 nell'evidenza che potevano rilevare anche anticorpi a bassa avidità di incerto valore clinico [196-
5 198]. L'attuale disponibilità di nuove preparazioni antigeniche (ricombinanti, estrattivi altamente
6 purificati, plasmidi circolari e oligonucleotidi sintetici) e altri accorgimenti metodologici ha portato
7 alla produzione di una nuova generazione di test immunometrici capaci di rilevare solo
8 autoanticorpi ad avidità intermedia e alta [199]. Pertanto, i metodi immunometrici in fase solida di
9 ultima generazione per la ricerca degli autoanticorpi anti-dsDNA risultano essere oggi molto più
10 accurati dei metodi utilizzati in precedenza [188, 195, 200]. Tuttavia, la loro specificità diagnostica
11 è ancora inferiore a quella del metodo CLIFT, per cui è opportuno che i risultati positivi ottenuti
12 con metodi immunometrici siano confermati con il CLIFT. In caso di risultato negativo del CLIFT,
13 il dato discrepante dovrà essere segnalato nel referto e il paziente andrà monitorato nel tempo.
14 Qualora alla negatività del CLIFT si associno la negatività degli ANA e un contesto clinico non
15 suggestivo di LES, è probabile che il dato di positività ottenuto con il metodo immunometrico sia
16 aspecifico.
17

18 ***Raccomandazione. Per la diagnosi di LES si raccomanda che la ricerca degli autoanticorpi anti-***
19 ***dsDNA venga eseguita con metodi immunometrici (CLIA, FEIA, ELISA ecc.), riportando i***
20 ***risultati in modo quantitativo. Per la sua elevata specificità la ricerca in IFI su Crithidia luciliae***
21 ***(CLIFT) dovrebbe essere utilizzata come test di conferma per i campioni risultati positivi con i***
22 ***suddetti immunodosaggi alla diluizione iniziale del siero di 1:10. Qualora il CLIFT risulti***
23 ***negativo e vi sia una concomitante negatività degli ANA e/o la clinica non sia suggestiva per***
24 ***LES, è probabile che la positività ottenuta con il metodo immunometrico sia aspecifica e ciò va***
25 ***segnalato come commento nella risposta.***
26

27 Qualità globale delle evidenze: alta

28 Forza della raccomandazione: forte

29 ***4c. Nei soggetti affetti da LES, la determinazione quantitativa degli anticorpi anti-dsDNA è utile***
30 ***nel monitoraggio del decorso clinico?***
31

32 Gli autoanticorpi anti-dsDNA, oltre a essere considerati marcatori specifici per il LES [24], sono
33 generalmente correlati all'attività di malattia e al danno di tessuti / organi, in particolare
34 all'interessamento renale [190, 201]. Nei pazienti con LES, il ruolo predittivo degli anticorpi anti-
35 dsDNA per le recidive e l'efficacia degli approcci terapeutici è stato ampiamente dimostrato [202-
36 205]. Dal momento che la concentrazione degli anticorpi anti-dsDNA correla, almeno in molti casi,
37 con l'andamento clinico del LES e della nefrite lupica, la loro determinazione quantitativa è utile
38 per il monitoraggio della terapia. L'intervallo di tempo fra due determinazioni successive è variabile
39 e dipende dalla fase di malattia (riaccensione, mantenimento o modifiche del trattamento) e tiene
40 conto dell'evidenza che l'incremento degli anticorpi anti-dsDNA può precedere l'esacerbazione
41 della nefropatia lupica [206]. Nella fase di monitoraggio, la determinazione quantitativa degli
42 anticorpi anti-dsDNA deve essere eseguita esclusivamente con metodologie immunometriche
43 (CLIA, FEIA, ELISA, RIA) e i risultati devono essere espressi in UI/ml (WHO/ISP Wo/80). Dal
44 momento che, pur impiegando metodi calibrati sullo standard internazionale di riferimento, esiste
45

una discreta variabilità nei risultati ottenuti con metodi diversi, è importante che i controlli nel tempo delle concentrazioni sieriche degli autoanticorpi anti-dsDNA siano effettuati sempre presso lo stesso Laboratorio e con lo stesso metodo analitico.

Raccomandazione. *Nella fase di monitoraggio si raccomanda la determinazione quantitativa degli anticorpi anti-dsDNA mediante metodi immunometrici (CLIA, FEIA, ELISA, RIA) con risultati espressi in UI/ml (WHO/ISP Wo/80). L'intervallo di tempo tra le determinazioni varia nelle diverse forme di malattia e deve tenere conto dell'evidenza che l'incremento degli anticorpi anti-dsDNA può precedere l'esacerbazione della nefropatia lupica. Per una migliore riproducibilità dei risultati si raccomanda di effettuare i dosaggi sempre con lo stesso metodo analitico.*

Qualità globale delle evidenze: alta

Forza della raccomandazione: forte

Conflitti di interesse Nessuno

Studi condotti su esseri umani e animali. Per questo tipo di studio non è richiesto l'inserimento di alcuna dichiarazione relativa agli studi effettuati su esseri umani e animali.

Appendice

Hanno collaborato alla realizzazione di questo documento, partecipando alla *consensus conference* tenutasi a Padova nei giorni 13 e 14 febbraio 2015, i seguenti componenti del Gruppo di Studio in Autoimmunologia della Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio:

Gaetano Amato, *UO Patologia Clinica, PO Civico e Benfratelli, ARNAS, Palermo, Italia*;
Giuseppina Barberio, *Medicina di Laboratorio, Dipartimento di Patologia Clinica, ULSS 9, Treviso, Italia*; Ignazio Brusca, *Laboratorio Analisi, Ospedale Buccheri La Ferla, Palermo, Italia*;
Massimo Daves e Stefan Platzgummer, *Laboratorio Centrale, Ospedale "Franz Tappeiner", Merano, Italia*; Martina Fabris, *Istituto di Patologia Clinica, Azienda Ospedaliero-Universitaria, Udine, Italia*; Elia Girolami, *Laboratorio di Autoimmunità, Dipartimento di Oncoematologia Pediatrica e Medicina Trasfusionale, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma, Italia*; Tiziana Imbastaro, *UOS Diagnostica di Laboratorio delle Malattie Autoimmuni, PO Spirito Santo, Pescara, Italia*; Maria Infantino, *Laboratorio di Immunologia e Allergologia, Ospedale S. Giovanni di Dio, Firenze, Italia*; Maura Musso, *Laboratorio Analisi, Azienda Ospedaliera S. Croce, Cuneo, Italia*; Maria Concetta Sorrentino, *Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche, ISMETT, Palermo, Italia*.

Bibliografia

1. Grilli R, Taroni F (2004) *Governo clinico. Governo delle organizzazioni sanitarie e qualità dell'assistenza*. Roma: Pensiero Scientifico Editore, pp.1-28
2. Tozzoli R, Bizzaro N, Bassetti D et al (1999) Linee guida per la diagnosi e il monitoraggio delle malattie reumatiche autoimmuni. *Med Lab* 2:124-132
3. Tozzoli R, Bizzaro N, Tonutti E et al (2001) Linee guida per l'impiego di test per autoanticorpi nucleo-citoplasmatici nelle malattie autoimmuni sistemiche. Revisione 2001. *Riv Med Lab* 2:77-83
4. Tozzoli R, Bizzaro N, Tonutti E et al (2002) Guidelines for the laboratory use of autoantibody tests in the diagnosis and monitoring of autoimmune rheumatic diseases. *Am J Clin Pathol* 117:316-324
5. Agmon-Levin N, Damoiseaux J, Kallenberg C et al (2014) International recommendations for the assessment of autoantibodies to cellular antigens referred to as anti-nuclear antibodies. *Ann Rheum Dis* 73:17-23
6. Schünemann A, Holger J, Oxman AD et al (2008) GRADE: grading quality of evidence and strength of recommendations for diagnostic tests and strategies. *BMJ* 336:1106-1110
7. Burlingame R, Peebles C (2006) Detection of antibodies. In: Pollard KM, ed. *Autoantibodies and Autoimmunity: Molecular Mechanisms in Health and Disease*. Weinheim, Germany: Wiley-VCH, pp.159-188
8. Stinton LM, Fritzler MJ (2007) A clinical approach to autoantibody testing in systemic autoimmune rheumatic disorders. *Autoimmun Rev* 7:77-84
9. Wilk A, Hoier-Madsen M, Fordlid J et al (2010) Antinuclear antibodies: a contemporary nomenclature using HEP-2 cells. *J Autoimmun* 35:279-290
10. Holman H, Robbins W (1959) Antinuclear antibodies in systemic lupus erythematosus. *Arthritis Rheum* 2:468-471
11. Solomon DH, Kavanaugh AJ, Schur PH (2002) Evidence-based guidelines for the use of immunologic tests: antinuclear antibody testing. *Arthritis Rheum* 47:434-444
12. Hochberg MC (1997) Updating the American College of Rheumatology revised criteria for the classification of systemic lupus erythematosus [letter]. *Arthritis Rheum* 40:1725
13. Costenbader KH, Karlson EW, Mandl LA (2002) Defining lupus cases for clinical studies: the Boston weighted criteria for the classification of systemic lupus erythematosus. *J Rheumatol* 29:2545-2550
14. Shoenfeld Y, Cervera R, Gershwin ME (2008) *Diagnostic criteria in autoimmune diseases*. Totowa, NJ: Humana Press
15. Arbuckle MR, McClain MT, Rubertone MV et al (2003) Development of autoantibodies before the clinical onset of systemic lupus erythematosus. *N Engl J Med* 349:1526-1533
16. Bizzaro N, Tozzoli R, Shoenfeld Y (2007) Are we at a stage to predict autoimmune rheumatic diseases? *Arthritis Rheum* 56:1736-1744
17. Bodolay E, Csiki Z, Szekanecz Z et al (2003) Five-year follow-up of 665 Hungarian patients with undifferentiated connective tissue disease (UCTD). *Clin Exp Rheumatol* 21:313-320
18. Bizzaro N (2008) The predictive significance of autoantibodies in organ-specific autoimmune diseases. *Clin Rev Allergy Immunol* 34:326-331

19. Bizzaro N (2007) Autoantibodies as predictors of disease: the clinical and experimental evidence. *Autoimmun Rev* 6:325-333
20. Eriksson C, Kokkonen H, Johansson M et al (2011) Autoantibodies predate the onset of systemic lupus erythematosus in northern Sweden. *Arthritis Res Ther* 13:R30
21. Jonsson R, Theander E, Sjöström B et al (2013) Autoantibodies present before symptom onset in primary Sjögren syndrome. *JAMA* 310:1854-1855
22. Tozzoli R (2008) The diagnostic role of autoantibodies in the prediction of organ-specific autoimmune diseases. *Clin Chem Lab Med* 46:577-587
23. Damoiseaux J, Andrade E, Fritzler MJ et al (2015) Autoantibodies 2015: From diagnostic biomarkers toward prediction, prognosis and prevention. *Autoimmun Rev* 14:555-563
24. Kavanaugh A, Tomar R, Reveille J et al (2000) Guidelines for clinical use of the antinuclear antibody test and tests for specific autoantibodies to nuclear antigens. *Arch Pathol Lab Med* 124:71-81
25. Hamaguchi Y, Koderia M, Matsushita T et al (2015) Clinical and immunologic predictors of scleroderma renal crisis in Japanese systemic sclerosis patients with anti-RNA polymerase III autoantibodies. *Arthritis Rheum* 67:1045-1052
26. Mahler M, Miller FW, Fritzler MJ (2014) Idiopathic inflammatory myopathies and the anti-synthetase syndrome: a comprehensive review. *Autoimmun Rev* 13:367-371
27. Egner W (2000) The use of laboratory tests in the diagnosis of SLE. *J Clin Pathol* 53:424-432
28. Sinico RA, Bollini B, Sabadini E et al (2002) The use of laboratory tests in diagnosis and monitoring of systemic lupus erythematosus. *J Nephrol* 15(suppl 6):S20-S27
29. Tan EM, Feltkamp TEW, Smolen JS et al (1997) Range of antinuclear antibodies in 'healthy' individuals. *Arthritis Rheum* 40:1601-1611
30. Hayashi N, Koshiba M, Nishimura K et al (2008) Prevalence of disease-specific anti-nuclear antibodies in general population: estimates from annual physical examinations of residents of a small town over a 5-year period. *Mod Rheumatol* 18:153-160
31. Wandstrat A, Carr-Johnson F, Branch V et al (2006) Autoantibody profiling to identify individuals at risk for systemic lupus erythematosus. *J Autoimmun* 27:153-160
32. Habash-Bseiso DE, Yale SH, Glurich I et al (2005) Serologic testing in connective tissue diseases. *Clin Med Res* 3:190-193
33. Kidd K, Cusi K, Mueller R et al (2005) Detection and identification of significant ANAs in previously determined ANA negative samples. *Clin Lab* 51:517-521
34. Cross LS, Aslam A, Misbah SA (2004) Antinuclear antibody-negative lupus as a distinct diagnostic entity—does it no longer exist? *QJM* 97:303-308
35. Colglazier CL, Sutej PG (2005) Laboratory testing in the rheumatic diseases: a practical review. *South Med J* 98:185-191
36. Peene I, Van Ael W, Vandebossche M et al (2000) Sensitivity of the HEp-2000 substrate for the detection of anti-SSA/Ro60 antibodies. *Clin Rheumatol* 19:291-295
37. Fritzler MJ1, Miller BJ (1995) Detection of autoantibodies to SS-A/Ro by indirect immunofluorescence using a transfected and overexpressed human 60 kD Ro autoantigen in HEp-2 cells. *J Clin Lab Anal* 9:218-224
38. Abeles AM, Abeles M (2013) The clinical utility of a positive antinuclear antibody test result. *Am J Med* 126:342-348

39. Bizzaro N, Wilk AS (2004) Appropriateness in anti-nuclear antibody testing: From clinical request to strategic laboratory practice. *Clin Exp Rheumatol* 22:349-355
40. Campanilho-Marques R, Bogas M, Ramos F et al (2014) Prognostic value of antinuclear antibodies in juvenile idiopathic arthritis and anterior uveitis. Results from a systematic literature review. *Acta Reumatol Port* 39:116-122
41. Bizzaro N, Antico A, Platzgummer S et al (2014) Automated antinuclear immunofluorescence antibody screening: A comparative study of six computer-aided diagnostic systems. *Autoimmun Rev* 13:292-298
42. Itoh Y, Rader MD, Reichlin M (1990) Heterogeneity of the Ro/SS-A antigen and autoanti-Ro/SSA response: evidence of the four antigenically distinct forms. *Clin Exp Immunol* 81:45-51
43. Mahler M, Ngo JT, Schulte-Pelkum J et al (2008) Limited reliability of the indirect immunofluorescence technique for the detection of anti-Rib-P antibodies. *Arthritis Res Ther* 10:R131
44. Muro WY, Sugiura K, Morita Y et al (2009) Evaluation of anti-ribosomal P protein immunoassay in Japanese patients with connective tissue diseases: comparison with an indirect immunofluorescence assay. *Scand J Rheumatol* 38:460-463
45. Bossuyt X, Frans J, Hendrickx A et al (2004) Detection of anti-SSA antibodies by indirect immunofluorescence. *Clin Chem* 50:2361-2369
46. Tanaka N, Muro Y, Sugiura K et al (2008) Anti-SSA/Ro antibody determination by indirect immunofluorescence and comparison of different methods of anti-nuclear antibody screening. *Mod Rheumatol* 18:585-592
47. Schulte-Pelkum J, Fritzler M, Mahler M (2009) Latest update on the Ro/SS-A autoantibody system. *Autoimmun Rev* 8:632-637
48. Mahler M, Miyachi K, Peebles C et al (2012) The clinical significance of autoantibodies to the proliferating cell nuclear antigen (PCNA). *Autoimmun Rev* 11:771-775
49. Tozzoli R, D'Aurizio F, Villalta D et al (2015) Automation, consolidation, and integration in autoimmune diagnostics. *Auto Immun Highlights* 6: 1-6
50. Tozzoli R, Bonaguri C, Melegari A et al (2013) Current state of diagnostic technologies in the autoimmunology laboratory. *Clin Chem Lab Med* 51:129-138
51. Phan TG, Wong RCW, Adelstein S (2002) Autoantibodies to extractable nuclear antigens: making detection and interpretation more meaningful. *Clin Diagn Lab Immunol* 9:1-7
52. Willitzki A, Hiemann R, Peters V et al (2012) New platform technology for comprehensive serological diagnostics of autoimmune diseases. *Clin Dev Immunol* 2012:Article ID 284740
53. Op De Beek K, Vermeersch P, Verschueren P et al (2011) Detection of antinuclear antibodies by indirect immunofluorescence and by solid phase assay. *Autoimmun Rev* 10:801-808
54. Nossent H, Rekvig OP (2001) Antinuclear antibody screening in this new millennium: farewell to the microscope? *Scand J Rheumatol* 30:123-126; discussion 127-128
55. Villalta D, Tozzoli R, Tonutti E et al (2007) The laboratory approach to the diagnosis of autoimmune diseases: Is it time to change? *Autoimm Rev* 6:359-365

- 1 56. Sinclair D, Saas M, Williams D et al (2007) Can an ELISA replace immunofluorescence
2 for the detection of anti-nuclear antibodies? The routine use of anti-nuclear antibody
3 screening ELISAs. *Clin Lab* 53:183-191
- 4 57. Fritzler MJ, Wiik A, Tan EM et al (2003) A critical evaluation of enzyme immunoassay
5 kits for detection of antinuclear antibodies of defined specificities. III. Comparative
6 performance characteristics of academic and manufacturers' laboratories. *J Rheumatol*
7 30:2374-2381
- 8 58. Fritzler MJ, Wiik A, Fritzler ML et al (2003) The use and abuse of commercial kits used to
9 detect autoantibodies. *Arthritis Res Ther* 5:192-201
- 10 59. Russell AS, Johnston C (2000) Relative value of commercial kits for ANA testing. *Clin*
11 *Exp Rheumatol* 21:477-480
- 12 60. Tonutti E, Bassetti D, Piazza A et al (2004) Diagnostic accuracy of ELISA methods as an
13 alternative screening test to indirect immunofluorescence for the detection of antinuclear
14 antibodies. Evaluation of five commercial kits. *Autoimmunity* 37:171-176
- 15 61. Zandman-Goddard G, Gilburd B, Shovman O et al (2005) The homogeneous multiplexed
16 system—a new method for autoantibody profile in systemic lupus erythematosus. *Clin Dev*
17 *Immunol* 12:107-111
- 18 62. Copple SS, Sawitzke AD, Wilson AM et al (2011) Enzyme-linked immunosorbent assay
19 screening then indirect immunofluorescence confirmation of antinuclear antibodies. *Am J*
20 *Clin Path* 135:678-684
- 21 63. Shanmugan VK, Swistowski DR, Saddic N et al (2011) Comparison of indirect
22 immunofluorescence and multiplex antibody screening in systemic sclerosis. *Clin*
23 *Rheumatol* 10:1363-1368
- 24 64. Avaniss-Aghajani E, Berzon S, Sarkissian A (2007) Clinical value of multiplexed bead-
25 based immunoassays for detection of autoantibodies to nuclear antigens. *Clin Vaccine*
26 *Immunol* 14:505-509
- 27 65. Bernardini S, Infantino M, Bellincampi L et al (2004) Screening of antinuclear antibodies:
28 comparison between enzyme immunoassay based on nuclear homogenates, purified or
29 recombinant antigens and immunofluorescence assay. *Clin Chem Lab Med* 42:1155-1160
- 30 66. Biagini RE, Parks CG, Smith JP et al (2007) Analytical performance of the AtheNA
31 MultiLyte ANA II assay in sera from lupus patients with multiple positive ANAs. *Anal*
32 *Bioanal Chem* 388:613-618
- 33 67. Bonilla E, Francis L, Allam F et al (2007) Immunofluorescence microscopy is superior to
34 fluorescent beads for detection of antinuclear antibody reactivity in systemic lupus
35 erythematosus patients. *Clin Immunol* 124:18-21
- 36 68. Caramaschi P, Ruzzenente O, Pieropan S et al (2007) Determination of ANA specificity
37 using multiplexed fluorescent microsphere immunoassay in patients with ANA positivity at
38 high titres after infliximab treatment: preliminary results. *Rheumatol Int* 27:649-654
- 39 69. Case Records of the Mass General Hospital (2009) Case 5-2009: A 47-year-old woman
40 with a rash and numbness and pain in the legs. *New Engl J Med* 360:7
- 41 70. Copple SS, Martins TB, Masterson C et al (2007) Comparison of three multiplex
42 immunoassays for detection of antibodies to extractable nuclear antibodies using clinically
43 defined sera. *Ann N Y Acad Sci* 1109:464-472
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65

- 1 71. Eissfeller P, Sticherling M, Scholz D et al (2005) Comparison of different test systems for
2 simultaneous autoantibody detection in connective tissue diseases. *Ann N Y Acad Sci*
3 1050:327-339
- 4 72. Ghillani P, Rouquette AM, Desgruelles C et al (2007) Evaluation of the Liaison ANA
5 screen assay for antinuclear antibody testing in autoimmune diseases. *Ann N Y Acad Sci*
6 1109:407-413
- 7 73. Gniewek RA, Stites DP, McHugh TM et al (1997) Comparison of antinuclear antibody
8 testing methods: immunofluorescence assay versus enzyme immunoassay. *Clin Diagn Lab*
9 *Immunol* 4:185-188
- 10 74. Gonzalez C, Garcia-Berrocal B, Perez M et al (2005) Laboratory screening of connective
11 tissue diseases by a new automated ENA screening assay (EliA Symphony) in clinically
12 defined patients. *Clin Chim Acta* 359:109-114
- 13 75. Lopez-Hoyos M, Rodriguez-Valverde V, Martinez-Taboada V (2007) Performance of
14 antinuclear antibody connective tissue disease screen. *Ann N Y Acad Sci* 1109:322-329
- 15 76. Homburger HA, Cahen YD, Griffiths J et al (1998) Detection of antinuclear antibodies:
16 comparative evaluation of enzyme immunoassay and indirect immunofluorescence methods.
17 *Arch Pathol Lab Med* 122:993-999
- 18 77. American College of Rheumatology (2009) Current Practice Issues: ACR tracking
19 concerns about ANA testing results. Atlanta, GA: American College of Rheumatology
- 20 78. Meroni PL, Schur PH (2010) ANA screening: an old test with new recommendations. *Ann*
21 *Rheum Dis* 69:1420-1422
- 22 79. Bizzaro N, Tozzoli R, Tonutti E et al (1998) Variability between methods to determine
23 ANA, anti-dsDNA and anti-ENA autoantibodies: a collaborative study with the biomedical
24 industry. *J Immunol Methods* 219:99-107
- 25 80. Binder SR (2006) Autoantibody detection using multiplex technologies. *Lupus* 15:412-421
- 26 81. Hayashi N, Kawamoto T, Mukai M et al (2001) Detection of antinuclear antibodies by use
27 of an enzyme immunoassay with nuclear HEp-2 cell extract and recombinant antigens:
28 comparison with immunofluorescence assay in 307 patients. *Clin Chem* 47:1649-1659
- 29 82. Maguire GA, Ginawi A, Lee J et al (2009) Clinical utility of ANA measured by ELISA
30 compared with ANA measured by immunofluorescence. *Rheumatology* 48:1013-1014
- 31 83. Fenger M, Wiik A, Hoier-Madsen M et al (2004) Detection of antinuclear antibodies by
32 solid-phase immunoassays and immunofluorescence analysis. *Clin Chem* 50:2141-2147
- 33 84. Parker JC, Bunn CC (2011) Sensitivity of the Phadia EliA connective tissue disease screen
34 for less common disease specific autoantibodies. *J Clin Pathol* 64:631-633
- 35 85. Almeida-Gonzalez D, Cabrera-de-Leon A, Rodriguez-Perez MC et al (2010) Efficiency of
36 different strategies to detect autoantibodies to extractable nuclear antigens. *J Immunol*
37 *Methods* 360:89-95
- 38 86. Bossuyt X (2000) Evaluation of two automated enzyme immunoassays for detection of
39 antinuclear antibodies. *Clin Chem Lab Med* 38:1033-1037
- 40 87. Nezlin R, Mozes E (1995) Detection of antigens in immune complexes by a dot blot assay.
41 *J Immunol Methods* 184:273-276
- 42 88. Lee SA, Kahng J, Kim Y et al (2012) Comparative study of immunofluorescent antinuclear
43 antibody test and line immunoassay detecting 15 specific autoantibodies in patients with
44 systemic rheumatic disease. *J Clin Lab Anal* 26:307-314

- 1 89. Lopez-Longo FJ, Rodriguez-Mahou M, Escalona-Monge M et al (2003) Simultaneous
2 identification of various antinuclear antibodies using an automated multiparameter line
3 immunoassay system. *Lupus* 12:623-629
- 4 90. Damoiseaux J, Boesten K, Giesen J et al (2005) Evaluation of a novel line-blot
5 immunoassay for the detection of antibodies to extractable nuclear antigens. *Ann N Y Acad*
6 *Sci* 1050:340-347
- 7
8 91. Mahler M, Radice A, Sinico RA et al (2012) Performance evaluation of a novel
9 chemiluminescence assay for detection of anti-GBM antibodies: an international multicenter
10 study. *Nephrol Dial Transplant* 27:243-252
- 11 92. Zafrir Y, Gilburd B, Carrasco MG et al (2013) Evaluation of an automated
12 chemiluminescent immunoassay kit for antinuclear antibodies in autoimmune diseases.
13 *Immunol Res* 56:451-456
- 14 93. Ghillani P, Dufat L, Himeur S et al (2012) Routine use of Zenit RA, a novel
15 chemiluminescent immunoanalyzer in autoimmune disease diagnosis. *Auto Immun*
16 *Highlights* 3:27-31
- 17 94. Vercammen M, Meirlaen P, Sennesael J et al (2007) Diagnostic accuracy of the FIDIS
18 multiplex fluorescent microsphere immunodetection system for anti-extractable nuclear
19 antigen (ENA) antibodies in connective tissue diseases. *Clin Chem Lab Med* 45:505-512
- 20 95. Fritzler MJ, Fritzler ML (2006) The emergence of multiplexed technologies as diagnostic
21 platforms in systemic autoimmune diseases. *Cur Med Chem* 13:2503-2512
- 22 96. Op De Beeck K, Vermeersch P, Verschueren P et al (2012) Antinuclear antibody detection
23 by automated multiplex immunoassay in untreated patients at the time of diagnosis.
24 *Autoimmun Rev* 12:137-143
- 25 97. Nifli AP, Notas G, Mamoulaki M et al (2006) Comparison of a multiplex, bead-based
26 fluorescent assay and immunofluorescence methods for the detection of ANA and ANCA
27 autoantibodies in human serum. *J Immunol Methods* 311:189-197
- 28 98. Fritzler MJ, Behmanesh F, Fritzler ML (2006) Analysis of human sera that are
29 polyreactive in an addressable laser bead immunoassay. *Clin Immunol* 120:349-356
- 30 99. Hanly JG, Su L, Farewell V et al (2010) Comparison between multiplex assays for
31 autoantibody detection in systemic lupus erythematosus. *J Immunol Methods* 358:75-80
- 32 100. Hanly JG, Thompson K, McCurdy G et al (2010) Measurement of autoantibodies using
33 multiplex methodology in patients with systemic lupus erythematosus. *J Immunol Methods*
34 352:147-152
- 35 101. Uto K, Hayashi N, Kinoshita S et al (2009) Evaluation of simultaneous detection of
36 specific antinuclear antibodies using multiplexed technology. *Rinsho Byori* 57:941-953
- 37 102. Fritzler MJ, Fritzler ML (2009) Microbead-based technologies in diagnostic autoantibody
38 detection. *Expert Opin Med Diagn* 3:81-89
- 39 103. Martins TB, Burlingame R, von Muhlen CA et al (2004) Evaluation of multiplexed
40 fluorescent microsphere immunoassay for detection of autoantibodies to nuclear antigens.
41 *Clin Diagn Lab Immunol* 11:1054-1059
- 42 104. Shovman O, Gilburd B, Zandman-Goddard G et al (2005) Multiplexed AtheNA multi-lyte
43 immunoassay for ANA screening in autoimmune diseases. *Autoimmunity* 38:105-109
- 44 105. Smith J, Onley D, Garey C et al (2005) Determination of ANA specificity using the
45 UltraPlex platform. *Ann N Y Acad Sci* 1050:286-294
- 46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

106. Robinson WH, DiGennaro C, Hueber W et al (2002) Autoantigen microarrays for multiplex characterization of autoantibody responses. *Nature Med* 8:295-301
107. Utz PJ (2004) Multiplexed assays for identification of biomarkers and surrogate markers in systemic lupus erythematosus. *Lupus* 13:304-311
108. Shovman JO, Gilburd B, Barzilai O et al (2005) Evaluation of the BioPlex 2200 ANA screen. Analysis of 510 healthy subjects: incidence of natural/predictive autoantibodies. *Ann N Y Acad Sci* 1050:380-388
109. Balboni I, Limb C, Tenenbaum JD et al (2008) Evaluation of microarray surfaces and arraying parameters for autoantibody profiling. *Proteomics* 8:3443-3449
110. Gilburd B, Abu-Shakra M, Shoenfeld Y et al (2004) Autoantibodies profile in the sera of patients with Sjogren's syndrome: the ANA evaluation—a homogeneous, multiplexed system. *Clin Dev Immunol* 11:53-56
111. Chandra PE, Sokolove J, Hipp BG et al (2011) Novel multiplex technology for diagnostic characterization of rheumatoid arthritis. *Arthritis Res Ther* 13:R102
112. Freeman RG, Raju PA, Norton SM et al (2005) Use of nanobarcodes particles in bioassays. *Methods Mol Biol* 303:73-83
113. Fritzler MJ (2012) Toward a new autoantibody diagnostic orthodoxy: understanding the bad, good and indifferent. *Auto Immun Highlights* 3:51-58
114. Tozzoli R, Bizzaro N (2012) The clinical autoimmunologist and the laboratory autoimmunologist: the two sides of the coin. *Autoimmun Rev* 11:766-770
115. Fritzler MJ (2011) The antinuclear antibody test: last or lasting gasp? *Arthritis Rheum* 63:19-22
116. Fritzler MJ (2006) Advances and applications of multiplexed diagnostic technologies in autoimmune diseases. *Lupus* 15:422-427
117. Baronaite R, Engelhart M, Mørk Hansen T et al (2014) A comparison of anti-nuclear antibody quantification using automated enzyme immunoassays and immunofluorescence assays. *Autoimmun Dis* 2014:534759
118. Gonzalez DA, Leòn ACD, Varela AR et al (2011) Autoantibody detection with indirect immunofluorescence on HEp-2 cells: starting serum dilutions for systemic rheumatic diseases. *Immunol Lett* 140:30-35
119. Dawkins RL, Martinez OP, Freitas EM et al (1998) Diagnosis of autoimmune disease. In: Rose NR, Mackay IR (eds) *The autoimmune diseases*. 3rd ed. San Diego: Academic Press, pp. 821-831
120. Kang I, Siperstein R, Quan T et al (2004) Utility of age, gender, ANA titer and pattern as predictors of anti-ENA and –dsDNA antibodies. *Clin Rheumatol* 23:509-515
121. Homburger HA (1995) Cascade testing for autoantibodies in connective tissue diseases. *Mayo Clin Proc* 70:183-184
122. Mahler M, Fritzler MJ (2014) Antinuclear antibodies in children. *J Rheumatol* 41:1260-1262
123. Mc Ghee JL, Kickingbird LM, Jarvis JN (2004) Clinical utility of antinuclear antibody tests in children. *BMC Pediatr* 4:13
124. Sperotto F, Cuffaro G, Brachi S et al (2014) Prevalence of antinuclear antibodies in schoolchildren during puberty and possible relationship with musculoskeletal pain: A longitudinal study. *J Rheumatol* 41:1405-1408

- 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
125. Perilloux BC, Shetty AK, Leiva LE et al (2000) Antinuclear antibody (ANA) and ANA profile tests in children with autoimmune disorders: a retrospective study. *Clin Rheumatol* 19:200-203
 126. Fritzler MJ, Rattner JB, Luft LM et al (2011) Historical perspectives on the discovery and elucidation of autoantibodies to centromere proteins (CENP) and the emerging importance of antibodies to CENP-F. *Autoimmun Rev* 10:194-200
 127. Mariz HA, Sato E, Barbosa SH et al (2011) Pattern on the antinuclear antibody – HEp-2 test is a critical parameter for discriminating antinuclear antibody-positive healthy individuals and patients with autoimmune rheumatic diseases. *Arthritis Rheum* 63:191-200
 128. Fabris M, Zago S, Tosolini R et al (2014) Anti-DFS70 antibodies: a useful biomarker in a pediatric case with suspected autoimmune disease. *Pediatrics* 134:e1706-1708
 129. Bizzaro N, Tonutti E, Villalta D (2011) Recognizing the dense fine speckled/lens epithelium-derived growth factor/p75 pattern on HEP-2 cells: not an easy task! *Arthritis Rheum* 63:4036-4037
 130. Mahler M, Parker T, Peebles CL et al (2012) Anti-DFS70/LEDGF antibodies are prevalent in healthy individuals compared to patients with systemic autoimmune rheumatic diseases. *J Rheumatol* 39:2104-2110
 131. Copple SS, Giles SR, Jaskowski TD et al (2012) Screening for IgG antinuclear autoantibodies by HEp-2 indirect fluorescent antibody assays and the need for standardization. *Am J Clin Pathol* 137:825-830
 132. Wiik AS, Bizzaro N (2012) Missing links in high quality diagnostics of inflammatory systemic rheumatic diseases. It is all about the patient! *Auto Immun Highlights* 3:35-49
 133. Hiemann R, Buttner T, Krieger T, et al (2009) Challenges of automated screening and differentiation of non-organ specific autoantibodies on HEp-2 cells. *Autoimmunity Rev* 9:17-22
 134. Voigt J, Krause C, Rohwäder E et al (2012) Automated indirect immunofluorescence evaluation of antinuclear autoantibodies on HEp-2 cells. *Clin Dev Immunol* 2012:651058
 135. Melegari A, Bonaguri C, Russo A et al (2012) A comparative study on the reliability of an automated system for the evaluation of cell-based indirect immunofluorescence. *Autoimmun Rev* 11:713-716
 136. Kivity S, Gilburd B, Agmon-Levin N et al (2012) A novel automated indirect immunofluorescence autoantibody evaluation. *Clin Rheumatol* 31:503-509
 137. Schouwens S, Bonnet M, Verschueren P et al (2014) Value-added reporting of antinuclear antibody testing by automated indirect immunofluorescence analysis. *Clin Chem Lab Med* 52:547-551
 138. Roggenbuck D, Hiemann R, Schierack P et al (2013) Digital immunofluorescence enables automated detection of antinuclear antibody endpoint titers avoiding serial dilution. *Clin Chem Lab Med* 52:9-11
 139. Roggenbuck D, Hiemann R, Bogdanos D et al (2013) Standardization of automated interpretation of immunofluorescence tests. *Clin Chim Acta* 421:168-169
 140. Bonroy C, Verfaillie C, Smith V et al (2013) Automated indirect immunofluorescence antinuclear antibody analysis is a standardized alternative for visual microscope interpretation. *Clin Chem Lab Med* 51:1771-1779

141. Bertin D, Jourde-Chiche N, Bongrand P et al (2013) Original approach for automated quantification of antinuclear autoantibodies by indirect immunofluorescence. *Clin Dev Immunol* 2013:182172
142. Egerer K, Roggenbuck D, Hiemann R et al (2010) Automated evaluation of autoantibodies on human epithelial-2 cells as an approach to standardize cell-based immuno-fluorescence tests. *Arthritis Res Ther* 12:R40
143. Meroni PL, Bizzaro N, Cavazzana I et al (2014) Automated tests of ANA immunofluorescence as throughput autoantibody detection technology: strenghts and limitations. *BMD Med* 12:38
144. Foggia P, Percannella G, Soda P et al (2013) Benchmarking HEp-2 cells classification methods. *IEEE Trans Med Imaging* 32:1878-1889
145. Bossuyt X, Cooreman S, De Baere H et al (2013) Detection of antinuclear antibodies by automated indirect immunofluorescence analysis. *Clin Chim Acta* 415:101-106
146. Schur PH (2009) A review of state-of-the-art testing for SLE and connective tissue disease. *The Rheumatologist*. <http://www.the-rheumatologist.org/article/know-your-labs/>? (Accesso settembre 2015)
147. Bizzaro N, Morozzi G (2008) A proposed model for effective collaboration between rheumatologists and clinical pathologists for the diagnosis of autoimmune rheumatic diseases. *Rheumatol Int* 29:849-851
148. Tan EM (1989) Antinuclear antibodies: diagnostic markers for autoimmune diseases and probes for cell biology. *Adv Immunol* 44:93-151
149. Mahler M, Fritzler MJ (2010) Epitope specificity and significance in systemic autoimmune diseases. *Ann N Y Acad Sci* 1183:267-287
150. Lyons R, Narain S, Nichols C et al (2005) Effective use of autoantibody tests in the diagnosis of systemic autoimmune disease. *Ann N Y Acad Sci* 1050:217-228
151. Bossuyt X, Luyckx A (2005) Antibodies to extractable nuclear antigens in antinuclear antibody-negative samples. *Clin Chem* 51:2426-2427
152. Bossuyt X, Marien G, Vanderschueren S (2010) A 67-year-old woman with a systemic inflammatory syndrome and sicca. *Clin Chem* 56:1508-1509
153. Hoffman IEA, Peene I, Veys EM et al (2002) Detection of specific antinuclear reactivities in patients with negative anti-nuclear antibody immunofluorescence screening tests. *Clin Chem* 48:2171-2176
154. Damoiseaux JGMC, Cohen Tervaert JW (2006) From ANA to ENA: How to proceed? *Autoimmun Rev* 5:10-17
155. Villalta D, Imbustaro T, Di Giovanni S et al (2012) Diagnostic accuracy and predictive value of extended autoantibody profile in systemic sclerosis. *Autoimmun Rev* 12:114-120
156. Dahle C, Skogh T, Aberg AK et al (2004) Methods of choice for diagnostic antinuclear antibody (ANA) screening: benefit of adding antigen-specific assays to immunofluorescence microscopy. *J Autoimmun* 22:241-248
157. Benito-Garcia E, Schur PH, Lahita R, American College of Rheumatology Ad Hoc Committee on Immunologic Testing Guidelines (2004) Guidelines for immunologic laboratory testing in the rheumatic diseases: anti-Sm and anti-RNP antibody tests. *Arthritis Rheum* 51:1030-1044

- 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
158. Buyon JP, Clancy RM (2003) Maternal autoantibodies and congenital heart block: mediators, markers, and therapeutic approach. *Autoimmunity* 36:41-50
 159. Scarsi M, Radice A, Pregnolato F et al (2014) Anti-Ro/SSA-p200 antibodies in the prediction of congenital heart block. An Italian multicentre cross-sectional study on behalf of the “Forum Interdisciplinare per la Ricerca nelle Malattie Autoimmuni (FIRMA) Group”. *Clin Exp Rheumatol* 32:848-854
 160. Maes L, Blockmans D, Verschueren P et al (2010) Anti-PM/Scl-100 and anti-RNA-polymerase III antibodies in scleroderma. *Clin Chim Acta* 411:965-971
 161. Villalta D, Morozzi G, Tampoia M et al (2010) Antibodies to fibrillarin, PM-Scl and RNA polymerase III detected by ELISA assays in patients with systemic sclerosis. *Clin Chim Acta* 411:710-713
 162. Tozzoli R, Sorrentino MC, Bizzaro N (2013) Detecting multiple autoantibodies to diagnose autoimmune co-morbidity (multiple autoimmune syndromes and overlap syndromes): a challenge for the autoimmunologist. *Immunol Res* 56:425-431
 163. Bizzaro N, Villalta D, Giavarina D et al (2012) Are anti-nucleosome antibodies a better diagnostic marker than anti-dsDNA antibodies for systemic lupus erythematosus? A systematic review and a study of metanalysis. *Autoimmun Rev* 12:97-106
 164. Mahler M, Silverman ED, Fritzler MJ (2010) Novel diagnostic and clinical aspects of anti-PCNA antibodies detected by novel detection methods. *Lupus* 19:1527-1533
 165. Mahler M, Gascon C, Patel S et al (2013) Rpp25 is a major target of autoantibodies to the Th/To complex as measured by a novel chemiluminescent assay. *Arthritis Res Ther* 15: R50
 166. Ghirardello A, Borella E, Beggio M et al (2014) Myositis autoantibodies and clinical phenotypes *Auto Immun Highlights* 5:69-75
 167. van Dooren SHJ, van Venrooij WJ, Pruijn GJM (2011) Myositis-specific antibodies (MSA): detection and clinical associations. *Auto Immun Highlights* 2:5-20
 168. Bentow C, Lakos G, Rosenblum R et al (2015) Clinical performance evaluation of a novel, automated chemiluminescent immunoassay, QUANTA Flash CTD Screen Plus. *Immunol Res* 61:110-116
 169. Watanabe N, Nagatomo R, Okubo S et al (2014) Performance and clinical evaluation of antinuclear antibody test based on fluorescence enzyme immunoassay. *Rinsho Byori* 62:315-323
 170. Bizzaro N, Tozzoli R, Villalta D (2015) Autoimmune diagnostics: the technology, the strategy and the clinical governance. *Immunol Res* 61:126-134
 171. Mahler M, Meroni PL, Bossuyt X et al (2014) Current concepts and future directions for the assesment of autoantibodies to cellular antigens referred to as anti-nuclear antibodies. *J Immunol Res* 2014:315179
 172. Tonutti E, Bizzaro N, Morozzi G et al (2015) Il test ANA-reflex: proposta del Gruppo di Studio in Autoimmunologia della SIPMeL. *Riv It Med Lab* (in stampa)
 173. Bizzaro N (2004) Flow-charts nella diagnosi delle malattie autoimmuni. *Riv Med Lab* 5:110-114
 174. Tampoia M, Brescia V, Fontana A et al (2007) Application of a combined protocol for rational request and utilization of antibody assays improves clinical diagnostic efficacy in autoimmune rheumatic disease. *Arch Pathol Lab Med* 131:112-116

175. Mahler M, Hanly JG, Fritzler MJ (2012) Importance of the dense fine speckled pattern on HEp-2 cells and anti-DFS70 antibodies for the diagnosis of systemic autoimmune diseases. *Autoimmun Rev* 11:642-645
176. Bonaguri C, Melegari A, Ballabio A et al (2011) Italian multicentre study for application of a diagnostic algorithm in autoantibody testing for autoimmune rheumatic disease: Conclusive results. *Autoimmun Rev* 11:1-5
177. Wiik AS (2005) Anti-nuclear autoantibodies: clinical utility for diagnosis, prognosis, monitoring, and planning of treatment strategy in systemic immunoinflammatory diseases. *Scand J Rheumatol* 34:260-268
178. Wiik AS, Fritzler MJ (2008) Laboratory tests in rheumatic disorders. In: Hochberg MC, Silman AJ, Smolen JS, Weinblatt ME, Weisman MH (eds) *Rheumatology*, 4th edn. Edinburgh, UK: Mosby Elsevier, pp. 219-232
179. Wiik AS, Gordon TP, Kavanaugh AF et al The IUIS/WHO/AF/CDC Committee for the Standardization of Autoantibodies in Rheumatic and Related Diseases (2004) Cutting edge diagnostics in rheumatology: the role of patients, clinicians, and laboratory scientists in optimizing the use of autoimmune serology. *Arthritis Care Res* 51:291-298
180. Bossuyt X, Louche C, Wiik A (2008) Standardisation in clinical laboratory medicine: an ethical reflection. *Ann Rheum Dis* 67:1061-1063
181. Villalta D, Bizzaro N, Platzgummer S et al (2005) Accuracy of semiquantitative immunoenzymatic methods in quantitation of anti-topoisomerase I (Scl-70) antibodies. *Clin Rheumatol* 24:453-459
182. Moder KG (1996) Use and interpretation of rheumatologic tests: a guide for clinicians. *Mayo Clinic Proc* 71:391-396
183. Petri M, Orbai AM, Alarcón GS et al (2012) Derivation and validation of the Systemic Lupus International Collaborating Clinics classification criteria for systemic lupus erythematosus. *Arthritis Rheum* 64:2677-2686
184. Haugbro K, Nossent JC, Winkler T et al (2004) Anti-dsDNA antibodies and disease classification in antinuclear antibody positive patients: the role of analytical diversity. *Ann Rheum Dis* 63:386-394
185. Lalvani A, Meroni PL, Millington KA et al (2008) Recent advances in diagnostic technology: application in autoimmune and infectious diseases. *Clin Exp Rheumatol* 26 (Suppl. 48): S62-S66
186. Mahler M, Fritzler MJ (2007) Anti-dsDNA antibody testing in the clinic: Farr or ELISA? *Nat Clin Pract Rheumatol* 3:72-73
187. Janyapoon K, Jivakanont P, Surbrsing R et al (2005) Detection of anti-dsDNA by ELISA using different sources of antigens. *Pathology* 37:63-68
188. Antico A, Platzgummer S, Bassetti D et al on behalf of the Study Group on Autoimmune Diseases of the Italian Society of Laboratory Medicine (SIMeL) (2010) Diagnosing systemic lupus erythematosus: new-generation immunoassays for measurement of anti-dsDNA antibodies are an effective alternative to the Farr technique and the *Crithidia luciliae* immunofluorescence test. *Lupus* 19:906-912
189. van Bavel CC, Fenton KA, Rekvig OP et al (2008) Glomerular targets of nephritogenic autoantibodies in systemic lupus erythematosus. *Arthritis Rheum* 58:1892-1899

- 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
190. Villalta D, Bizzaro N, Bassi N et al (2013) Anti-dsDNA antibody isotypes in systemic lupus erythematosus: IgA in addition to IgG anti-dsDNA help to identify glomerulonephritis and active disease. *PLoS One* 8:e71458
 191. Munoz LE, Gaip US, Herrmann M (2008) Predictive value of anti-dsDNA autoantibodies: importance of the assay. *Autoimmun Rev* 7:594-597
 192. Isenberg D, Smeenk R (2002) Clinical laboratory assays for measuring anti-dsDNA antibodies. Where are we now? *Lupus* 11:797-800
 193. Villalta D, Tozzoli R, Bizzaro N et al (2005) The relevance of autoantigenic source and cutoff definition in antichromatin (nucleosome) antibody immunoassay. *Ann N Y Acad Sci* 1050:176-184
 194. Kim KH, Han JY, Kim JM et al (2007) Clinical significance of ELISA positive and immunofluorescence negative anti-dsDNA antibody. *Clin Chim Acta* 380:182-185
 195. Villalta D, Bizzaro N, Corazza D et al (2002) Evaluation of a new automated enzyme fluoroimmunoassay using recombinant plasmid dsDNA for the detection of anti-dsDNA antibodies in SLE. *J Clin Lab Anal* 16:227-232
 196. Smeenk RJT (2002) Detection of autoantibodies to dsDNA: Current insights into its relevance. *Clin Exp Rheumatol* 20:294-300
 197. Villalta D, Bizzaro N, Corazza D et al (2002) Evaluation of a new automated enzyme fluoroimmunoassay using recombinant plasmid dsDNA for the detection of anti-dsDNA antibodies in SLE. *J Clin Lab Anal* 16:227-232
 198. Ghirardello A, Villalta D, Morozzi G et al (2007) Evaluation of current methods for the measurement of serum anti-double-stranded DNA antibodies. *Ann N Y Acad Sci* 1109:401-406
 199. Radice A, Sinico RA (2006) A new oligonucleotide-based ELISA for the detection of antidouble-stranded DNA antibodies. *Autoimmunity* 39:113-119
 200. Ghirardello A, Villalta D, Morozzi G et al (2011) Diagnostic accuracy of currently available anti-double-stranded DNA antibody assays. An Italian multicentre study. *Clin Exp Rheumatol* 29:50-56
 201. Borg EJ, Horst G, Hummel EJ et al (1990) Measurement of increases in anti-double-stranded DNA antibody levels as a predictor of disease exacerbation in systemic lupus erythematosus: a long-term, prospective study. *Arthritis Rheum* 33:634-643
 202. Linnik MD, Hu JZ, Heilbrunn KR et al (2005) Relationship between anti-double-stranded DNA antibodies and exacerbation of renal disease in patients with systemic lupus erythematosus. *Arthritis Rheum* 52:1129-1137
 203. Swaak AJK, Aarden LA, Staius van Eps LW et al (1979) Anti-dsDNA and complement profiles as prognostic guides in systemic lupus erythematosus. *Arthritis Rheum* 22:226-235
 204. Bizzaro N, Villalta D (2001) The predictive value of ANA and anti-dsDNA antibodies for flares in SLE. *Rheumatology* 40:1422-1423
 205. Ng KP, Manson JJ, Rahman A et al (2006) Association of antinucleosome antibodies with disease flare in serologically active clinically quiescent patients with systemic lupus erythematosus. *Arthritis Rheum* 55:900-904
 206. Bootsma H, Spronk P, Derksen R et al (1995) Prevention of relapses in systemic lupus erythematosus. *Lancet* 345:1595-1599

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Tabella 1. Grado di qualità delle evidenze

Grado	Tipo di evidenze	Criteri di valutazione
Alto (4+)	Studi randomizzati <u>senza</u> serie limitazioni o studi osservazionali ben condotti con <u>importanti</u> effetti	Ulteriori studi non dovrebbero modificare la stima dell'efficacia dell'effetto osservato
Moderato (3+)	Studi randomizzati <u>con</u> serie limitazioni o studi osservazionali ben condotti e con buoni effetti	È probabile che ulteriori studi possano modificare la stima dell'efficacia dell'effetto osservato
Basso (2+)	Studi randomizzati con limitazioni <u>molto</u> serie o studi osservazionali senza particolari forza di evidenze e <u>senza</u> importanti limitazioni	È molto probabile che ulteriori studi possano modificare la stima dell'efficacia dell'effetto osservato
Molto basso (1+)	Studi randomizzati con limitazioni molto serie e risultati inaffidabili o studi osservazionali <u>con</u> serie limitazioni o solo case report	Qualsiasi stima dell'efficacia dell'effetto è incerta

Tabella 2. Gli ANA nella diagnosi delle malattie reumatiche autoimmuni sistemiche (MRA).

Alcuni anticorpi antinucleo sono utilizzati come criteri diagnostici per definite malattie autoimmuni sistemiche, altri sono a supporto alla diagnosi di MRA

Malattia autoimmune sistemica	Ruolo degli anticorpi antinucleo	
	Criteri classificativo-diagnostici	Supporto alla diagnosi
Lupus eritematoso sistemico	ANA, anti-dsDNA, anti-Sm	
Connettivite mista	anti-U1RNP (ad alto titolo)	
Sindrome di Sjögren	Anti-SSA/Ro - anti-SSB/La	
Sclerosi sistemica	Anti-centromero, anti-Topo I, anti-RNA polimerasi III	
Sindrome anti-tRNA sintetasi		Anti-tRNA sintetasi, altri anticorpi miosite-specifici
Sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi secondaria (sAPS)		ANA, anti-dsDNA
Artrite cronica giovanile (stratificazione del rischio di uveite)		ANA
anti-dsDNA: anti-DNA a doppio filamento; anti-U1RNP: anti-U1 ribonucleoproteina; anti-Topo I: anti-topoisomerasi I (Scl70).		
<i>Fonte: Wiik AS (2006) International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Guidelines for Antinuclear Antibody Testing 17:3 (modificata).</i>		

Tabella 3. Quadri nucleari/citoplasmatici IFI rilevati utilizzando come substrato le cellule HEP-2 con antigeni e diagnosi correlate

Pattern fluoroscopici osservati più frequentemente		
Pattern nucleari	Antigeni correlati	Diagnosi correlate
Omogeneo	dsDNA, istoni, nucleosomi	LES, LES/vasculite indotta da farmaci, artrite cronica giovanile
Omogeneo e nucleolare	Sc170 (DNA-topoisomerasi I)	SSc (diffusa)
Centromerico	CENP-A, CENP-B, CENP-C (proteine del cinetocoro)	SSc (circoscritta), Raynaud, cirrosi biliare primitiva
<i>Coarse speckled</i> : fluorescenza granulare grossolana	U1-snRNP, U2snRNP, U4/U6-snRNP, Sm, hnRNP (matrice nucleare)	Connettivite mista, LES, Raynaud, SSc, SS, connettivite indifferenziata
<i>Fine speckled</i> : fluorescenza finemente granulare	SSA/Ro, SSB/La, RNA polimerasi II e III, Ku, Ki, Mi2	LES, SS, SSc, miopatie autoimmuni, connettivite mista
Nucleolare	PM/Sc1, RNA-polimerasi I, To/Th, nucleofosfoproteina B23, U3-snRNP (fibrillarina), hUBF/NOR-90, nucleolina/C23	SSc, Raynaud, miopatie autoimmuni, sindromi overlap autoimmuni
Pattern citoplasmatici	Antigeni correlati	Diagnosi correlate
Diffuso	Proteine P ribosomiali, Jo1 (istidil-tRNA sintetasi), altre aminoacil-tRNA sintetasi, SRP (<i>signal recognition particle</i>)	LES, miopatie autoimmuni
Finemente granulare	Jo1, SRP, M2 e altre proteine del complesso piruvato deidrogenasi (PDC-E2)	Miopatie autoimmuni, cirrosi biliare primitiva, malattia polmonare interstiziale
Pattern fluoroscopici osservati meno frequentemente		
Pattern nucleari	Antigeni correlati	Diagnosi correlate
Membrana nucleare (tipo lamina)	Laminine A, B1, B2, C, LAP1A, LAP2	Epatite cronica attiva, vasculiti, LES
Membrana nucleare (tipo complesso del poro nucleare)	gp210, nucleoporina p62, proteine del complesso del poro nucleare	Cirrosi biliare primitiva
Anticorpi verso antigeni della fase replicativa cellulare: anti-MSA1 o NuMA, fuso mitotico, CENP-F, <i>mid-body</i>	NuMA 1, centrofilina, NuMA 2 (HsEg5), CENP-F	AR, patologie infiammatorie, polmonite (micoplasma)
<i>Nuclear dots</i>	Sp100, corpi PML, coilina-p80	Cirrosi biliare primitiva, epatite cronica attiva, SS
Centrioli	Enolasi, ninein (GSK3B-interacting protein), pericentrina	SSc, Raynaud, patologie infiammatorie
DFS (<i>dense fine speckled</i>)	DFS70/LEDGF-P75	Individui sani e patologie infiammatorie
Pleomorfo-PCNA	Ciclina o proteina ausiliaria della DNA-polimerasi delta (antigene nucleare delle cellule in proliferazione)	LES, SS, malattie linfoproliferative
Pattern citoplasmatici	Antigeni correlati	Diagnosi correlate
Simil-lisomiale	Antigeni di organuli citoplasmatici, lisosomi, proteine associate alla membrana lisomiale, proteina GW, endosoma (<i>early endosome antigen 1</i>)	Patologie neurologiche, SS, LES, AR, cirrosi biliare primitiva, UCTD
Apparato del Golgi	proteine del Golgi: golgina 67, golgina 95, golgina 97, golgina 160, golgina 245, macrogolgina/ giantin	LES, SS, RA, sindromi overlap, atassia cerebellare
Citoscheletro	Actina, citocheratina, tropomiosina, vimentina	Miopatie autoimmuni, infezioni e altre malattie infiammatorie
<i>Rings and rods</i>	In corso di valutazione: CTPS1 e IMPDH2	Probabile associazione con terapia antivirale (interferon e ribavirina) in soggetti HCV+

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Tabella 4. Esami di secondo livello da eseguirsi in rapporto al pattern di fluorescenza nel test ANA-reflex

Pattern fluoroscopico	Esami di secondo livello suggeriti
Omogeneo \geq 1:160	Anti-antigeni intracellulari specifici e dsDNA e/o nucleosomi
Granulare \geq 1:160	Anti-antigeni intracellulari specifici e anti-dsDNA
Omogeneo e nucleolare \geq 1:160	Anti-antigeni intracellulari specifici, anti-dsDNA e anti-PM/Scl
Citoplasmatico granulare \geq 1:160	Anti-antigeni intracellulari specifici o antisintetasi e anti P-ribosomiale
Pleomorfo	Anti-PCNA, anti-dsDNA
Centromerico	Anti-CENP-B solo nei casi dubbi o associati ad altra positività
Nucleolare con titolo $>$ 1:320 e in presenza di fenomeno di Raynaud	Anti-fibrillarina, PM/Scl e RNA polimerasi

Nota: anti-antigeni intracellulari specifici = anti-SSA/Ro, anti-SSB/La, anti-Sm, anti-RNP o U1RNP, anti-Scl70, anti-Jo1, anti-CENP-B.

Pattern di tipo *few nuclear dots*, nucleolari a basso titolo, fuso mitotico, midbody, CENP-F, simil-lisosomiale, Golgi e citoscheletro, non necessitano di test di secondo livello.

Conflict of Interest Disclosure Form

È politica La Rivista Italiana della Medicina di Laboratorio-Italian Journal of Laboratory Medicine garantire l'equilibrio, l'indipendenza, l'obiettività e il rigore scientifico dei suoi contenuti. Tutti gli autori sono tenuti a esplicitare ai lettori un conflitto reale o apparente di interessi che possono avere un rapporto diretto con il loro articolo.

Questo riguarda i rapporti con le aziende farmaceutiche, i produttori di dispositivi biomedicali o altre società i cui prodotti o servizi possono essere correlati all'argomento dell'articolo o alla sponsorizzazione dello studio descritto.

Non si vuole assolutamente contrastare la pubblicazione di articoli da parte di autori con un potenziale conflitto di interessi. L'esplicitazione di quest'ultimo infatti è necessario esclusivamente ai lettori, che avranno così gli strumenti per potersi formare un proprio giudizio e stabilire se il conflitto di interessi abbia o meno portato a una possibile distorsione sia nell'esposizione sia nelle conclusioni presentate.

Si prega il corresponding author di compilare e inviare il modulo per l'Editor-in-Chief per conto di tutti gli autori elencati di seguito.

It is the policy of La Rivista Italiana della Medicina di Laboratorio-Italian Journal of Laboratory Medicine to ensure balance, independence, objectivity, and scientific rigor in the Journal. All authors are expected to disclose to the readers any real or apparent conflict(s) of interest that may have a direct bearing on the subject matter of the article. This pertains to relationships with pharmaceutical companies, biomedical device manufacturers or other corporation whose products or services may be related to the subject matter of the article or who have sponsored the study.

The intent of the policy is not to prevent authors with a potential conflict of interest from publication. It is merely intended that any potential conflict should be identified openly so that the readers may form their own judgements about the article with the full disclosure of the facts. It is for the readers to determine whether the authors' outside interest may reflect a possible bias in either the exposition of the conclusions presented.

The corresponding author will complete and submit this form to the Editor-in-Chief on behalf of all

authors listed below.

Rivista/Journal

La Rivista Italiana della Medicina di Laboratorio-Italian Journal of Laboratory

Medicine tTitolo dell'Articolo/Article Title

LINEE GUIDA PER L'IMPIEGO DI TEST PER AUTOANTICORPI ANTI ANTIGENI INTRACELLULARI NELLA DIAGNOSI E NEL MONITORAGGIO DELLE MALATTIE AUTOIMMUNI SISTEMICHE. REVISIONE 2015.

Autori/Authors

Luigi Cinquanta , Nicola Bizzaro , Danilo Villalta , Gabriella Morozzi , Elio Tonutti , Marcello Bagnasco , Giampaola Pesce , Danila Bassetti , Brunetta Porcelli , Lucia Terzuoli , Antonio Antico , Antonella Radice , Gaia Deleonardi , Marilina Tampoia , Renato Tozzoli

Per cortesia tenga presente che il conflitto di interessi verrà pubblicato su ogni articolo.

Please note that a conflict of interest statement is published with each paper.

Per cortesia dichiarare qui di seguito l'eventuale conflitto di interesse

If any conflict exists, please define hereafter:

(Se non è presente alcun conflitto scriva "Nessuno", altrimenti descriva gli accordi/interessi


finanziari con una o più organizzazioni che potrebbero essere percepiti come reali o apparenti conflitti di interesse in relazione ai contenuti del suo articolo.)

(If none, "None" or describe financial interest/arrangement with one or more organizations that could be perceived as a real or apparent conflict of interest in the context of the subject of this article):

None, Nessuno

Nome/Name

Luigi Cinquanta

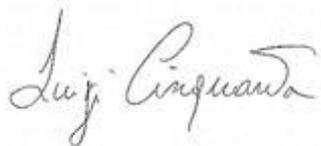

Data/Date 23/7/2015

Per cortesia compili questo documento e lo carichi in Editorial Manager insieme al suo articolo.

Please fill in this document and upload it in Editorial Manager while submitting your manuscript.